

音と光で知らせるコードレス呼び出し機

ホームセーフティアラートⅡ 取扱説明書

ADX-208

△ ご注意

- 本品は非常に大音量ですので、決して耳に近づけないでください。
- 心臓ペースメーカーをご使用の方は本製品を使用しないでください。
- 本製品の取扱は丁寧に行ってください。落下等は、破損の原因になります。
- 改造・部品の変更は行わないでください。故障の原因になります。
- シンナー、ベンジンなどで拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。材質の変質・変色の原因になります。
- 本品は防水機能を有しませんので、水のかかる場所、湿気のあるところには設置しないでください。
- 直射日光や火のそばに近づけないでください。変形・故障の原因になります。
- 電池は飲み込むと危険です。電池は幼児の手の届かない場所に保管してください。万一飲み込んだ場合には直ちに医師にご相談ください。
- 電池は、充電・分解・過熱・火の中に入れてください。
- 使用済み電池の廃棄は、各自治体の区分に従ってください。
- いつでも参照できるように、この取扱説明書は保管しておいてください。

本品の使用により生じた損害等のいかなる請求についても、当社では一切責任を負えませんので、ご了承ください。

〒108-0023 東京都港区芝浦4-3-4 田町きよたビル4階
TEL:03-3798-3617 FAX:03-3798-3618

キヨタ株式会社 福祉住環境事業部 開発グループ

取扱説明書の内容、保証書を
ご確認の上、ご使用ください。

アルビクス株式会社
ALVIX Corporation

〒959-0214
新潟県燕市吉田法花堂1974-1
Tel:0256-93-5035
Fax:0256-93-5038
URL: <http://www.alvix.jp>

MADE IN CHINA

2018.4.


音と光で知らせるコードレス呼び出し機

ホームセーフティアラートⅡ 取扱説明書

ADX-208

このたびは、ホームセーフティアラートⅡ (ADX-208)をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

ご使用前に「使用方法」「注意事項」など記載内容をよくお読みいただき、各部の機能を充分にご理解の上ご使用ください。

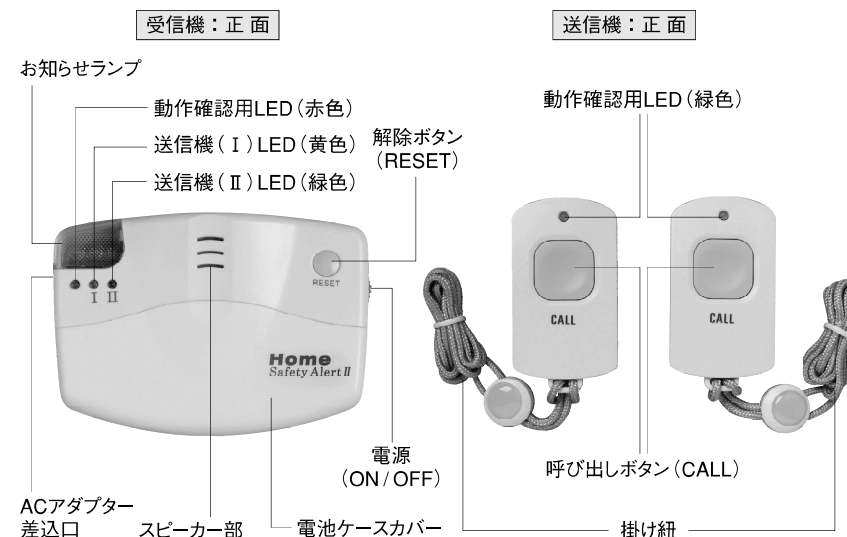各部名称**特長**

- 簡単な操作方法と、シンプルなデザインを採用した、コードレスタイプの呼び出し機です。
- 受信機1個と、送信機2個のセット商品です。
- 送信機のボタンを押すだけで簡単に呼び出し音やお知らせランプでお知らせができ、お年寄りや介護が必要な方などがお使いいただくのに最適です。
- 受信機は、ACアダプター (付属) 又は単3アルカリ乾電池 (別売) 4本の2ウェイ電源を採用。用途に合わせてご使用いただけます。
- 受信機は電池消耗のお知らせ機能付きです。
- 動作距離: 約50m (直線見通し)


乾電池の入れ方

受信機

- 1.電源がOFFになっていることを確認します。
- 2.受信機の電池ケースカバーを、下方向にスライドさせて外します。【図1】
- 3.電池ケース底面の極性表示に従って、単3アルカリ乾電池（別売）を4本入れてください。
- 4.電池ケースカバーを元に戻します。

※長期間ご使用の場合は、付属のACアダプターでの使用をお勧めいたします。

※単3アルカリ乾電池とACアダプターは、兼用しないでください。

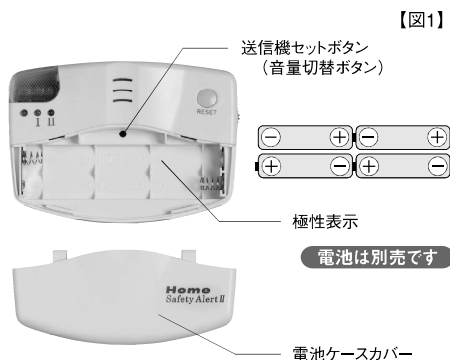

【図1】

送信機 (購入当初は試験用電池が内蔵されています。)

- 1.送信機裏面のネジを外し、電池ケースカバーを外します。【図2】
- 2.電池ケース底面の極性表示に従って、ボタン型リチウム電池を入れてください。
- 3.電池ケースカバーとネジを元に戻します。

受信機への送信機の登録

- 1.受信機の電源をONにします。
- 2.受信機の送信機セットボタン（音量切替ボタン）【図1】を押し続けながら、どちらかの送信機の呼び出しボタン（CALL）を押します。
- 3.短いビープ音が鳴ると登録完了です。
- 4.もう一方の送信機の登録も、上記1～3の手順通りに行います。
- 5.それぞれの送信機のボタンを押して登録確認を行います。

※電池を抜いたり交換した際は、必ず続けて受信機への送信機2個の登録を行ってください。この操作を行わないと、送信機の呼び出しボタン（CALL）を押しても受信機は反応しません。



【図2】

電池は別売です

※送信機に付属している電池は試験用電池です。電池の容量が無い場合は、新しい電池に交換してください。

音量調整方法

- 受信機が使用できる状態で受信機の送信機セットボタン（音量切替ボタン）を短く押し、呼び出し音の音量を3段階に切替えます。

※送信機セットボタン（音量切替ボタン）を短く押すと、大→中→小に切替わります。

設置方法

- 受信機は、リビング・キッチン・寝室などに置いてください。
- 送信機は、掛け紐がついておりますので、常に携帯しておくか、お年寄りや介護が必要な方などの手が届くところに置いてください。

使用方法

- 1.使い始める前に送信機の絶縁シートを引き抜いてください。
- 2.送信機と受信機の登録が必要です。登録方法は、2ページの《受信機への送信機の登録》を参照ください。
- 3.受信機の電源をONにします。
短いビープ音が1回鳴り、動作確認用LED（赤色）が点灯します。
- 4.送信機の呼び出しボタンを押します。
受信機が感知して、呼び出し音を約20秒間鳴らし、お知らせランプが音に合わせて赤く点滅します。
- 5.どちらの送信機のボタンを押したのかは、受信機の送信機（Ⅰ）・（Ⅱ）LEDと音で確認できます。
黄色のLEDが点灯した場合は、送信機（Ⅰ）です。
緑色のLEDが点灯した場合は、送信機（Ⅱ）です。
- 6.受信機の呼び出し音とお知らせランプを止めるには、受信機の解除ボタン（RESET）を押してください。
短いビープ音が1回鳴り、呼び出し音とのお知らせランプの点滅が止まります。

※呼び出し音が作動していると、もう一方の送信機の呼び出しボタンを押しても、呼び出し機能は作動しません。

電池消耗のお知らせ機能

受信機 (単3アルカリ乾電池を使用の場合)

電池容量が少なくなると、10秒毎に動作確認用LEDが点滅します。その際は新しい電池と交換してください。

送信機

電池容量が少なくなると、送信機の動作確認用LEDが暗くなり、送信機の動作距離が明らかに短くなります。その際は新しい電池と交換してください。

仕 様

※製品の仕様・デザインは改良等のため、予告なく変更する場合があります。

商 品 名	ホームセーフティアラートⅡ	
型 式	ADX-208	
部 品 名	受 信 機	送 信 機 (共通)
外形寸法W×D×H	約120×26×83 (mm)	約35×13×67 (mm)
重 量	約96 (g)	約22 (g)
動 作 距 離	約50m (直線見通し)	
呼 び 出 し 音	呼び出し (CALL) (お知らせランプ点滅)	
呼 び 出 し 時 間	約20秒又は解除ボタン (RESET) を押すまでのどちらか早い方	
音 量	大 約90dB / 1m > 中 > 小	
電 源	DC6V専用ACアダプター (付属) 又は 単3アルカリ乾電池×4本 (別売)	ボタン型リチウム電池 CR2032×1個 (別売)
電 池 寿 命	待機時: 約30日 (大・呼び出し音連続: 約8時間)	待機時: 約4.5ヶ月
	※計算値のため、実際の使用状況によって異なります。	
使用温度範囲	0℃～50℃	
セ ッ ト 内 容	受信機×1個、送信機×2個 (掛け紐付)、ACアダプター×1個 (受信機用)	
付 属 品	送信機試験用電池 (ボタン型リチウム電池 CR2032) ×2個	