

ご購入ありがとうございます！

seca

seca 203





テープを長くしたまま巻き取る時は、勢いで他の人に当たらないよう気をつけてください。

注意


*周囲測定の際は、テープがねじれないようお気をつけてください。(目盛は 5.8cm からなっています)

*裏面の「直線」測定用は、通常商品と同じように、目盛が「0cm」から印字されています。

使い方

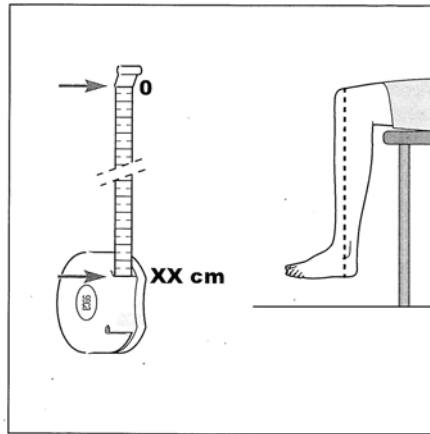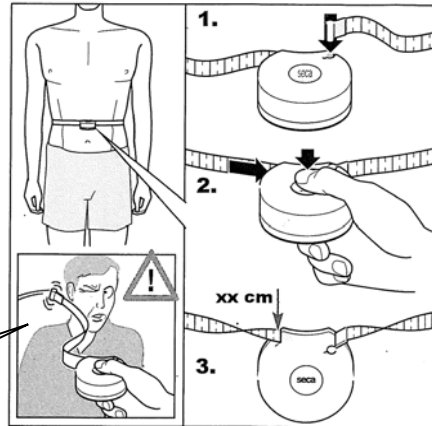

WHR

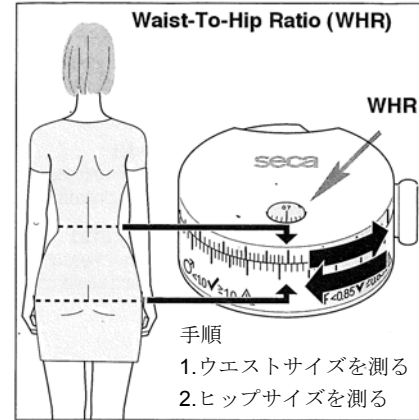

WHR とはウエスト・ヒップ比の略です。本体下部を回してヒップ周囲値を本体上部のウエスト周囲値にあわせると、上部の窓に WHR (ウエスト・ヒップ比) の数値が出ます。

WHR	✓	⚠
♂	< 1.0 *	≥ 1.0 *
♀	< 0.85 *	≥ 0.85 *

日本では、WHR の基準値の明確な定めはございませんが、seca 社製品は WHO の基準に準じて製作されております。

テクニカルデータ

MAX	205 cm
d	1 mm
🔍	±5 mm

📏	ø = 70 mm h = 28 mm
kg	~ 75 g
🔍 WHR	0,5 - 0,9: ±0,03 0,9 - 1,2: ±0,04 1,2 - 1,6: ±0,05 1,6 - 2,0: ±0,06

🌡️	10°C - 40°C
🌡️	-25°C - 65°C