

## -保証-

お客様の責によらない、製造時の不具合が原因とされる欠陥については納品日より1年間の保証期間が適用されます。ご購入時の領収証の提示がない場合は保証の適用となりませんので、大切に保管願います。尚、バッテリー、ケーブル、電源ユニットなどのすべての可動部品は保証の対象外となります。また、修理の際の運送中の損害で保証請求ができるのは、商品の発送時の梱包状態にある時のみとなりますので、ご購入時の梱包材は一式保管しておいてください。

secaの技術者以外が商品内部を開けた場合及び、海外でご使用されている場合においては保証対象外となります。

**seca**

**seca 803**



seca 株式会社

〒262-0011

千葉県千葉市花見川区三角町 94-2


TEL 043-216-0850

## **seca803**

このたびは seca 社製品、seca803 家庭用体重計をご購入いただきまして、誠にありがとうございます。ご使用に際しまして、以下のご使用方法をご一読くださいますようお願い致します。

## -ご使用方法-

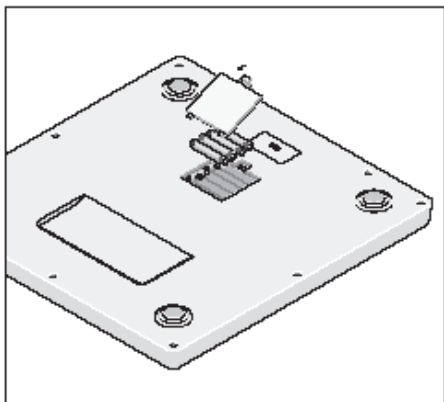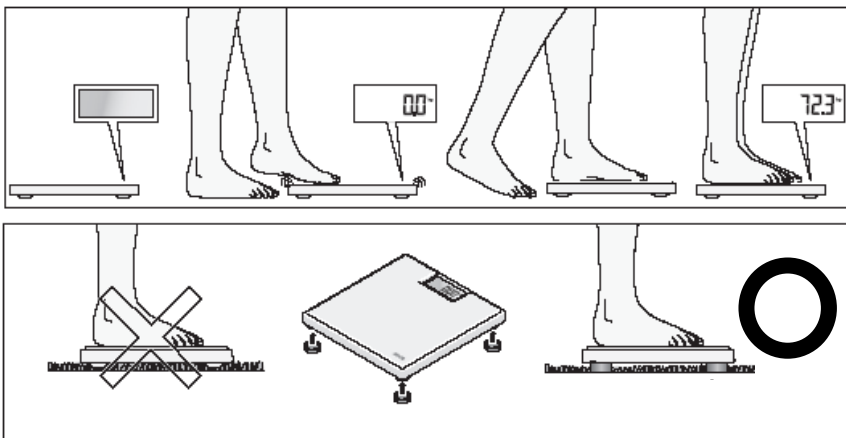
1. 底面にあるバッテリーボックスに単4電池を4本、正しく入れてください。




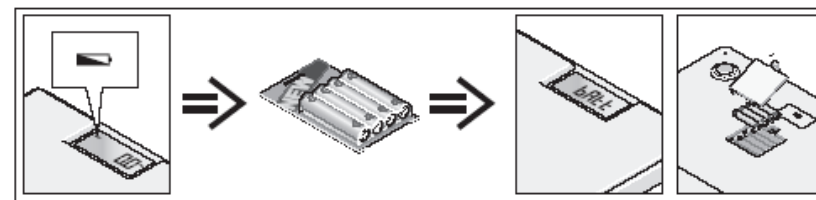
2. 体重計を水平な床面においてください。

重要:じゅうたんなどの上でご使用の場合は、附属のじゅうたん用固定キャップを体重計底面の床接地箇所にはめてください。通常の床の場合は、はめないでください。

3. 乗る前に、体重計中央辺りを軽く足でタップしてください。電源が入ります。
4. ディスプレイの表示が 0.0 になったのを確認してから測定してください。



5. ディスプレイ左上に  というマークが表示されたら、乾電池残量がわずかです。新しい乾電池をご用意ください。**b.b.t.t**が表示されましたら、乾電池を交換してください。



※本製品は自動保持機能付です。体重計を降りましてもしばらく、測定値が表示されますが、前の方の測定値が残っている状態でも、0表示を待たずにそのまま次の測定は可能です。

## -仕様-

最大計量: 150Kg

最小表示: 100g

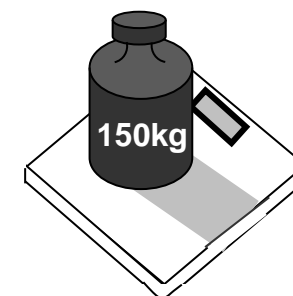
サイズ(WxDxH): 325 x 315 x 35 mm

重量: 1.4Kg

乾電池: 単4電池x4本

適応温度: 10度~40度

EMC(電磁両立性)規格適合商品



						
150 kg	0,1 kg	a = 325 mm b = 315 mm c = 35 mm	1,4 kg	単4電池 4本	+10°C ... +40°C	