

取扱説明書

保証書付 添付文書

保管用

製造番号

Lourdes beauté

fem on tech

on plate ems

ルルドボーテ
フェムオンテック 温プレートEMS
品番 AX-FRL914



目次

- | | |
|-------------------|--------------------|
| ⚠ 安全上のご注意 …… 1～4 | 🔧 故障かなと思ったら… 11～12 |
| 🔍 梱包内容と各部の名称… 5～6 | 🗑 廃棄について …… 13 |
| 👤 使いかた …… 7～10 | ⚙ 仕様 …… 14 |
| 📦 お手入れ・保管について… 11 | ♡ 保証とアフターサービス… 裏表紙 |

このたびはAX-FRL914をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
なお、この取扱説明書には保証書がついています。
お読みになられたあとも、大切に保管してください。

※デザイン仕様を一部変更している場合があります。ご了承ください。

ATEX

⚠ 安全上のご注意

ご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために必ずお守りいただく事を説明しています。

警告表示の意味 表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で示しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。



禁止を促す記号



強制を促す記号

⚠ 警告

症状について



次の人は使用しないでください。症状を悪化させるおそれがあります。

- ・医師から身体への刺激を禁じられている人
例：血栓 [そく (塞) 栓] 症、重度の動脈瘤、急性静脈瘤、各種皮膚炎、皮膚感染症 (皮下組織の炎症を含む) など

自分で意思表示のできない方や身体の不自由な方には使用させないでください。
けがの原因になります。



次のような人は必ず医師とご相談の上ご使用ください。

事故や健康を害するおそれがあります。

- ・ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人
- ・悪性腫瘍のある人
- ・心臓に障害のある人
- ・温度感覚喪失が認められる人
- ・妊娠初期の不安定期から出産直後の人
- ・糖尿病などによる高度な末しょう (梢) 循環障害からくる知覚障害のある人
- ・皮膚に創傷のある人
- ・安静を必要としている人や体調がすぐれない人
- ・骨粗しょう症の人、せきついの骨折、ねんざ、肉離れなど、急性 [とう (疼痛性)] 疾患の人
- ・体温38℃以上 (有熱期) の人
例：急性炎症症状 [けん (倦) 怠感、悪寒、血圧変動など] の強い時期、衰弱しているとき
- ・けんしょう (腱鞘) 炎の人
- ・動脈りゅう (瘤)、静脈りゅう (瘤) のある人
- ・その他、医療機関で治療中の人



使用中身体に異常を感じたときはすぐに使用を中止し、医師に相談してください。

健康を害するおそれがあります。

ご使用について



幼児やお子様を使用させたり、本体で遊ばせたり、上にのせたりしないでください。

他の健康機器や美容機器、電気製品とは併用しないでください。

故障を発見したり、身体に異常を感じた時は使用しないでください。

通電中、通電部／ヒーター部に金属を接触させないでください。

事故やけがの原因になります。

連続で長時間使用しないでください。

低温やけどの恐れがあります。

「低温やけど」について

比較的低い温度(40℃～60℃)であっても、長時間皮膚の同じ場所に触れていると、熱い、痛いといった自覚症状がない場合でもやけどします。長時間同じ場所に当て続けしないでください。



1回の使用はヒーター高温：10分間、ヒーター低温：120分間、EMS：10分間とし、連続使用は避けてください。

長時間の連続使用は、低温やけどやけがの原因になります。

やけどしそうな激しい熱刺激を感じたらすぐに取り外してください。

- ・冬場など身体が冷えた状態で使用する際も、熱刺激が過敏に感じる場合があります。
- ・ヒーター高温モードで熱刺激が過敏に感じる場合は、低温モードでのご使用を推奨します。


使い始めは「低温」「EMS / 弱」でご利用ください。

初めから刺激を強くすると、健康を害するおそれがあります。



⚠ 安全上のご注意

⚠ 警告



充電池について

-  本製品は充電式電池を内蔵しています。火中投入、加熱、高温・低温下での充電、使用、放置をしないでください。
発熱、発火、破裂の原因になります。

異常(故障)について

-  通電部／ヒーター部に、キズや断線、破損がないか確認してください。破損等がある場合は使用しないでください。
けがの原因になります。
-  故障を発見したときはすぐに使用を中止し電源を切ってください。
事故やけがの原因になります。

その他

-  本体に強い衝撃をあたえないでください。
故障や事故の原因になります。
-  改造はしないでください。また、機器が故障した場合には、勝手に修理などせず、販売店又は(株)アテックス カスタマーサービス課に連絡してください。
火災・感電・けがの原因になります。

注意

ご使用について



浴室などの湿度の高いところで使用しないでください。
高温下や火気の近くで使用、保管しないでください。
操作部に水などの液体をかけないでください。
操作部を曲げたり、落としたり、強いショックを与えないでください。
汗をかいたり、油分の残った肌には使用しないでください。
飲酒時、喫煙中、就寝時、入浴時には使用しないでください。
肌に強い痛みを感じたらすぐに使用を中止してください。

電源について



USBケーブルを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。また、重いものを乗せたり、挟み込んだりしないでください。

感電・ショート・火災の原因になります。

収納時にUSBケーブルを本体に巻きつけないでください。

コードに負荷がかかり断線し、ショート・火災などの原因になります。

USBケーブル端子にピンやゴミを付着させないでください。

感電・ショート・火災の原因になります。

お手入れの際は必ずUSBケーブルを本体から抜いてください。また、ぬれた手で抜き差ししないでください。

感電やけがの原因になります。

USBケーブルが傷んだり充電口がゆるい時は使用しないでください。

付属のUSBケーブルは本品の充電用途のみに使用してください。



USBケーブルを抜くときは、コードを持たずに端子部分を持って引き抜いてください。

感電・ショート・発火の原因になります。

3ヶ月に一度は充電放電を行ってください。

長時間ご使用にならないと機能が低下し、本体内の充電電池の故障の原因になります。

🔍 梱包内容と各部の名称

梱包内容の確認


開梱したら、ご使用になる前に
以下のものが揃っているか確認してください

- 本体
- USBケーブル
- 収納ポーチ
- ストラップ


各部の名称

本体


【正面】

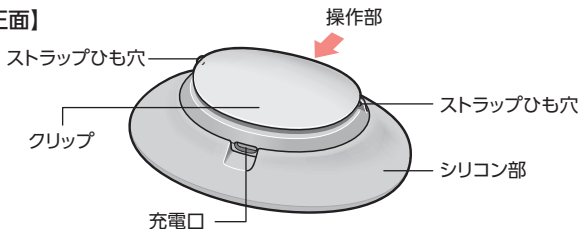

【裏面】

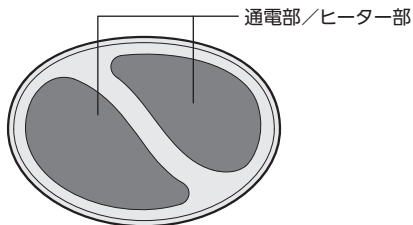


操作部

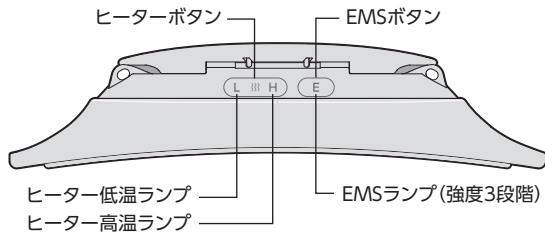


付属品

USBケーブル

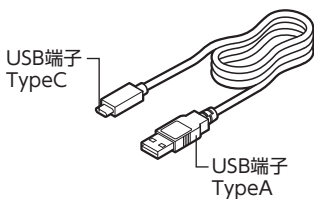

収納ポーチ

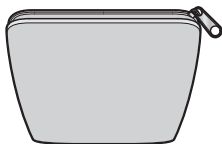


ストラップ



ご使用前の準備

1 充電口とパソコンをUSBケーブルでつなぐ

- ① USBケーブルのTypeC端子を、本体の充電口に差し込みます。
 - ② USBケーブルのTypeA端子をパソコン等のUSBポートに差し込みます。
- ※USBケーブルは根元まで差し込んでください。

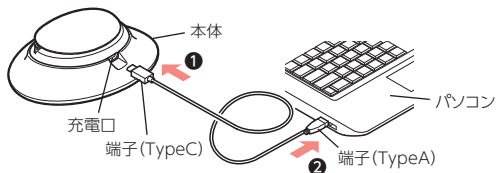

2 充電を開始する

- EMSランプ (赤色) が点滅
 - ランプの点滅が青色に点灯すると、充電が完了
- ※約3時間の満充電で、合計約1.5時間使用できます。
※使用する環境、負荷によって使用時間は異なります。
※周囲温度が高温/低温の中では充電時に保護装置が働くことがあります。常温で充電してください。
※使い始めや長時間使用しなかった時は満充電してください。
※充電中は使用できません。




- ①パソコンに電源が入っていないとUSBポートから電力が供給されません。
※一部のパソコンでは、供給するものがあります。
- ②家庭用コンセントからUSB電源出力に変換できるACアダプターもご利用いただけます。
※定格出力が電圧5Vで、電流は500mA以上のものを使用。
※使用する機器の取扱説明書をよく読み注意に従ってください。
※USB電源出力が十分でない場合は充電ができない場合があります。
その場合は他の機器をお試しください。
※モバイルバッテリーでは仕様により充電ができない場合があります。

3 落下防止のストラップを装着する


POINT

- 落下防止のために、必要な時はストラップをご使用ください。
- 本体クリップのみで固定するときは、ストラップの取り付けは不要です。

- ①ストラップの本体側ひもを本体のストラップひも穴に通します。
- ②本体側ひもを引っ張り、衣服側クリップをくぐらせ固定します。

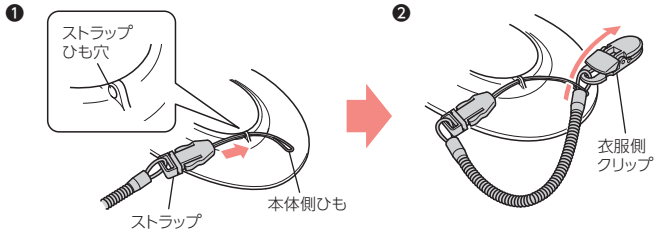

- ③ストラップの衣服側クリップのレバーを起こし、クリップを広げます。
- ④固定したい位置にクリップをはさみ、レバーを押さえ固定します。

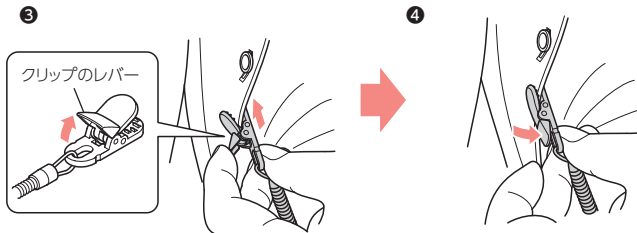


使いかた

使用を開始する


1 本体のクリップを
ショーツの上部に留める

2 通電部／ヒーター部を
下腹部などに当てる

- ※EMSをご使用になる場合は素肌に触れる必要があります。
- ※できるだけ通電部／ヒーター部を肌に密着させてください。

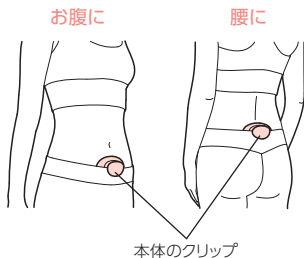

3 ボタンを操作し、お好みのモードを選ぶ

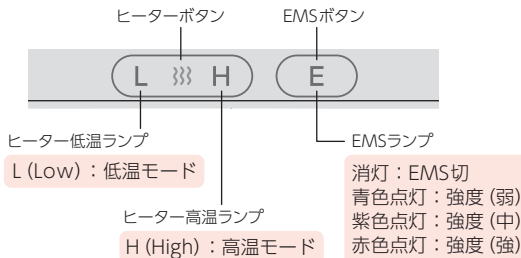


ヒーターを使用する

ヒーターボタンのL (低温モード) または、H (高温モード) を押します。
選択したモードのランプが点灯し、ヒーターが始動します。

- ・動作中に低温モード／高温モードを切り替えることができます。
- ・選択中のモードのボタンを再度押しすと、ヒーターを停止します。

EMSを使用する

EMSボタンを押します。
EMSランプが青色に点灯し、強度（弱）でEMSが始動します。
EMSボタンを押すたびに、強度が切り替わります。

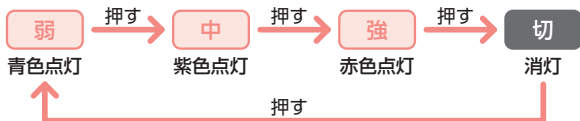

4 終了する

ヒーターおよびEMSは、それぞれのボタンを押してから、下記の自動オフタイマー時間で自動停止します。

ヒーター低温モード：約120分 ヒーター高温モード：約10分

EMS (各強度)：約10分

- EMS動作中にEMSボタンを長押しすると、EMS機能がオフになります。
- EMS機能は、肌に通電しないまま約30秒経過すると自動停止します。
※使用後に汚れが気になる場合は、通電部／ヒーター部をかるく湿らせ、乾いた布やティッシュなどで拭きとってください。
- 電池の残量が少なくなると、使用中に各ランプが点滅します。充電してください。

5 本体を外す

本体のクリップを開き、ショーツから取り外してください。


⚠ 注意

- 本体を身体から外す作業は、必ず電源を切ってからおこなってください。
- 通電中に指先が通電部／ヒーター部に触れると、強い刺激が伝わります。



お手入れ・保管について

- 通電部／ヒーター部を軽く水で湿らせ、乾いた布やティッシュなどで汚れを拭きとってください。
- 3ヶ月に1度は充電してください。
- 温度-10℃～60℃、湿度20～85% RHの環境で保管してください。
- 直射日光の当たる場所、高温、多湿、水気の近くは避けて保管してください。
- お子様やペットが触られる場所に保管しないでください。

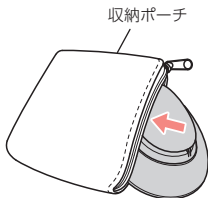

付属の収納ポーチに入れ、持ち運びも!

故障かなと思ったら

修理に出す前にもう一度点検してください。それでも正常に動作しないときはお買上げの販売店に修理を依頼してください。絶対に分解したり、修理改造はしないでください。異常動作をしてけがや事故のおそれがあります。

電源が入らない	充電が不十分、または充電が切れていませんか？ →P.7を参考に正しく充電してください。
	充電中ではありませんか？ →充電中は使用できません。
充電できない	長期間保管し電池が放電しきっていませんか？ →完全放電すると使用できませんので3ヶ月に1度は充電してください。
	高温時や低温時は充電できないことがあります。 →常温下で充電してください
	USBケーブル等が正しく接続されていますか？ →P.7を参考に正しく充電してください。

ヒーターが 温かくない ／熱すぎる	ヒーターのモード切り替えは使用していますか？ →低温/高温モードを切り替えてご使用ください。(P.9参照)
	連続で使用していませんか？ →連続で使用すると温かさを正常に感じられない場合があります。
	電池残量が少なくなっていますか？ →充電してください。
ヒーター使用中に 温度が上下する	低温やけど防止のため温度の自動調整を繰り返します。 →異常ではありません。
ヒーターが 途中で止まる	下記時間以上使用していませんか？ →低温モード時：約120分、高温モード時：約10分でタイマーが働き自動停止します。
	電池残量が少なくなっていますか？ →充電してください。
EMSの刺激を 感じない ／弱い	充電が不十分、または充電が切れていませんか？ →P.7を参考に正しく充電してください。
	通電部が肌に直接触れていますか？ →P.9を参考に正しく装着ください。
	装着部の肌が乾燥していませんか？ →乾燥が理由でEMSが通電しない場合は、装着部の肌をかるく湿らせてご使用ください。
	通電部がゴミやホコリで汚れていませんか？ →P.11のお手入れに従って清掃してください。
	EMSの強度調節はしていますか？ →P.10を参考に調節してください。
	電池残量が少なくなっていますか？ →充電してください。
EMSの 電気刺激が 強い	EMSの強度調節はしていますか？ →P.10を参考に調節してください。
	通電部が肌に密着していますか？ →なるべく広い面積の肌に通電部が密着するように装着してください。
EMSの 電気刺激が 途中で止まる	下記時間以上使用していませんか？ →EMSご使用後約10分でタイマーが働き自動停止します。
	肌に通電されていますか？ →肌に通電しないまま約30秒経過すると、EMS機能のみ自動停止します。
使用中に各ランプが 点滅する	電池残量が少なくなっていますか？ →残量が少なくなると、ランプが点滅します。充電してください。

廃棄について

■リチウムイオン電池のリサイクルについてお願い



Li-ion00

本製品は、リチウムイオン電池を内蔵しています。リチウムイオン電池はリサイクルすることができる大切な資源ですので、リサイクルにご協力をお願いいたします。本製品を廃棄する時は、お住まいの市区町村の指示に従ってください。

- 廃棄するときは、電池を分解しないでください。
- 本製品は、一般家庭ごみとして廃棄しないでください。廃棄されたリチウムイオン電池が、ごみ収集車などで破壊されてショートし、発火、発熱の原因になります。



■リチウムイオン電池の取り出しかた

製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しないでください。

⚠ 警告

下記の手順は、製品を破棄するためのものであり修理用のものではありません。ご自分で分解した場合、機能が維持できず、故障または事故の原因になります。

- 充電残量がある場合は、電池を使い切ってください。
 - ドライバーを用い、次の手順で分解してください。
- ① 樹脂部の下部にマイナスドライバーを差し込み、
 - ② 樹脂部を開きます。
 - ③ 基板についている電池コードのコネクタ（白）を抜きとります。
 - ④ 充電電池を取り外します。

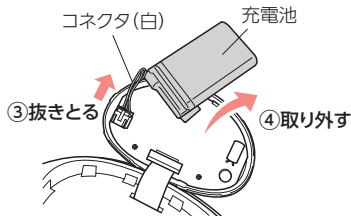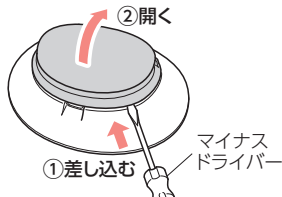

- 取り出した電池は、⊕と⊖の端子をショートさせないように、コネクターの端子部にテープを貼り絶縁してください。その後リチウムイオン電池のリサイクル協力店などで回収を依頼してください。

仕様

販売名	ルルドポーテ フェムオンテック 温プレートEMS
商品番号	AX-FRL914
製品サイズ	本体：(約) W120×L85×H30 (mm) 収納ポーチ：(約) W140×L100×H30 (mm) USBケーブル長：約1m
本体重量	約85g
タイマー	ヒーター低温約120分、ヒーター高温約10分、EMS約10分
電源電圧	DC5V (リチウムイオン電池)
内蔵電池	1000mAh
充電時間	約3時間
連続使用時間	約1.5時間 (ヒーター高温モード、EMS強併用時)
素材	本体樹脂部 (クリップ部含む)：PC+ABS樹脂 本体軟性部：TPE (熱可塑性エラストマー) 通電部/ヒーター部：ポリウレタン (カーボン含有) 収納ポーチ：シリコン
ヒーター温度	低温：約40度 高温：約44度
出力周波数	30Hz ~ 10000Hz
使用環境温湿度	0℃ ~ 40℃ 20 ~ 85%RH
保管環境温湿度	-10℃ ~ 60℃ 20 ~ 85%RH
生産国	中国

※本製品は医療機器ではありません。

♡保証とアフターサービス

- 1 本製品の保証書は、下記に添付しています。保証書は必ず「お買上げ年月日」と「販売店名」など、所定事項の記入および記載内容をよくお読みのもと、大切に保管してください。
- 2 保証期間は、お買上げ日より1年です。保証期間中に修理を依頼されるときは保証書をご提出のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。
- 3 保証期間経過後の修理につきましては、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- 4 弊社は「ルルドポータ フェムオンテック 温プレートEMS」の補修用性能部品の最低保有期間を、製造切後最低3年間としています。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 5 保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明な点は、お買上げの販売店、または下記に明記しておりますカスタマーサービス課までお問い合わせください。

本製品は厳密な検査を経て出荷されたものです。お客様の正常な使用状態で万一故障した場合は、保証書に記載された期間、下記保証規約により無料修理をお約束いたします。修理は必ず本書を添えてご依頼ください。

品名	ルルドポータ フェムオンテック 温プレートEMS	型番	AX-FRL914
お買上げ年月日★	年 月 日	保証期間	お買上げ日より1年 本体
★お客様	お名前	★販売店	
	ご住所		
	TEL : () -		

★欄に記入のない場合、本書は無効となる場合がありますので、必ず記入の有無をご確認ください。

保証規約 本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

- 1 保証期間中であっても以下の理由またはこれに準ずる理由により生じた故障などについては本保証書は適用されません。
 - ・取扱上の不注意、誤った使用方法
 - ・天災、火災などによる故障または損傷
 - ・お買上げ後の転居等による輸送、移動、落下など
 - ・保存上の不備
 - ・弊社または弊社の指定した事業所以外で行われた修理、改造
 - ・本製品本来の使用目的以外の使用
 - ・一般家庭以外（例えば業務用の長時間使用、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷
- 2 運賃諸掛り費用は原則としてお客様にてご負担願います。
- 3 無料保証期間はご購入の日から1年です。
- 4 保証の適用されない故障および保証期間経過後の故障については、有料で修理いたします。
- 5 保証書の再発行はいたしません。
- 6 本書のご提示がない場合や無料保証期間を過ぎた場合は、有料修理になります。
- 7 本書は日本国内においてのみ有効です。



株式会社 アテックス

ATEX

<https://www.atex-net.co.jp/>

株式会社アテックス 大阪物流センター
〒595-0074 大阪府泉大津市小津島町6-11

■修理・アフターサービスについてのご相談・お問い合わせは



カスタマーサービス課
0120-486-505

受付時間 平日9:00~17:00
(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

914-01-220316