





取扱説明書

製品を安全にご使用いただくために、この取扱説明書よくお読みになり、お読みいただいた後はお手元に保管してください。

 危険	取り扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、死亡または重症を受ける可能性が想定される内容を示しています。
 注意	取り扱いを誤った場合に、人が怪我を負ったり財産に損害を受ける恐れがある内容を示しています。


安全上のご注意

 危険
<ul style="list-style-type: none"> ●火気や火花が出る器具の近くには設置しないでください。変形や破損、火災の原因になります。 ●取扱説明書の組み立て方法にしたがって組み立ててください。 規格外での組み立ては怪我や事故の原因になります。 ●凹凸のない平らな床に設置してください。安定が悪いと転倒や事故の原因になります。 ●移動の際にひじ掛けや背パイプにつかまると転倒する恐れがあります。 ポータブルトイレチェアまでの移動が難しい場合は介助者の付き添いが必要です。 ●人が座った状態、物をのせたままの状態では移動しないでください。 転倒や破損、事故の原因になります。 ●改造や分解したり本来の目的以外で使用しないでください。 転倒や破損、事故の原因になります。
 注意
<ul style="list-style-type: none"> ●本製品を使用する前に破損やガタつき等の異常が発生していないか、ご使用前に必ず点検してください。 ●本体を移動する場合、バケツが空であることを確認してください。 空でないと、中身がこぼれて床や畳などを汚す恐れがあります。 ●汚物処理などでバケツを取り出すときには、座面が倒れてこないか確認してください。 座面が倒れてくると、指をはさんで怪我をする恐れがあります。 ●バケツの中にタバコなどの火気を落とさないでください。変形や破損、火災の原因になります。 ●本製品は屋内用です。屋外でのご使用はしないでください。

■部品の名称

【商品仕様】

- 外形寸法：W570×D530×H600～775mm ■座面高：410～560mm（6段階） ■重量：6.2kg
- 材質：フレーム=スチール、バケツ=ポリプロピレン

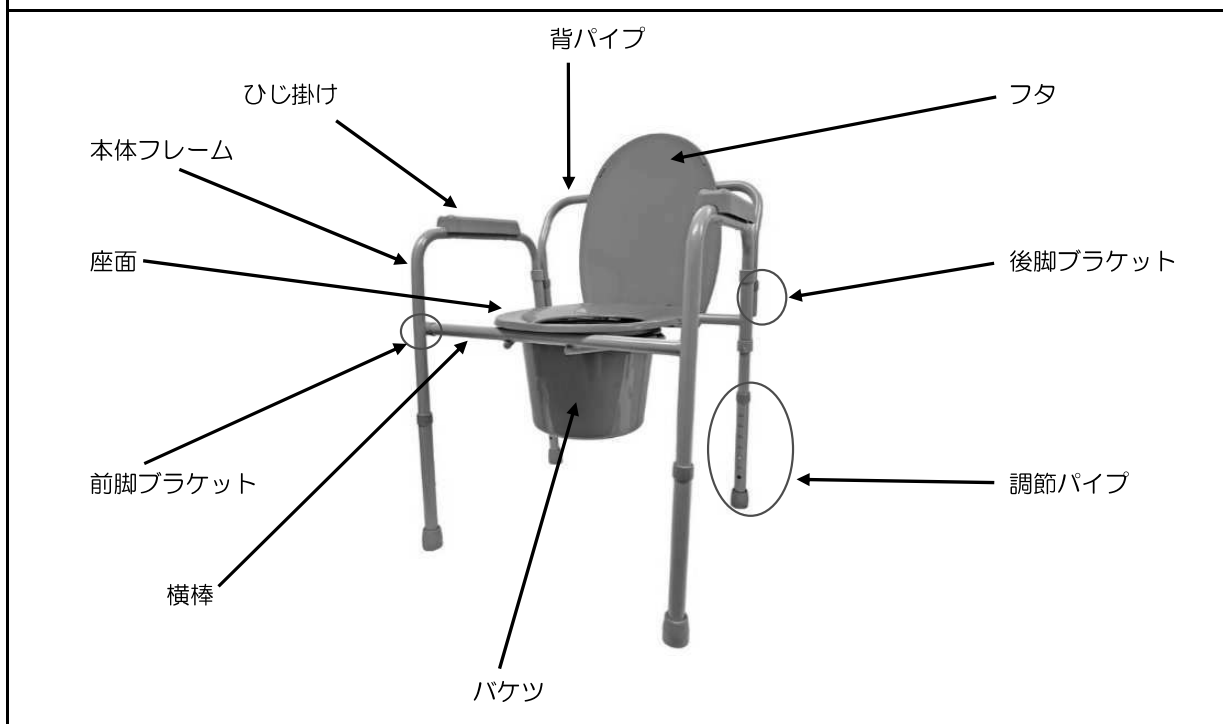

■ 部品の確認

- この製品には①～⑥の部品が同梱されています。
不足がないこと、破損など異常がないことをご確認ください。
※不足品や不具合などがございましたら、お買い求めの販売店までご連絡ください。

①本体フレーム



②背パイプ



③バケツ



④座面








⑤フタ



⑥スプラッシュガード



■ 組み立て方（工具は不要です）※部品①～⑤を使用

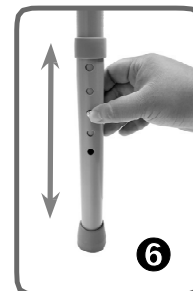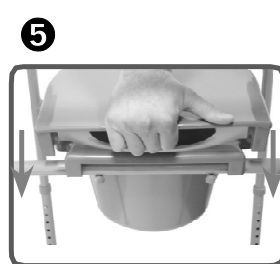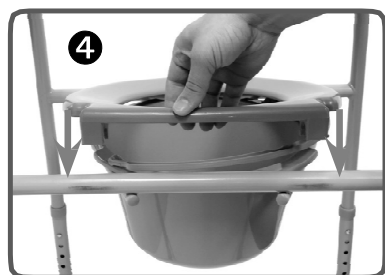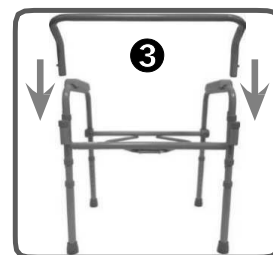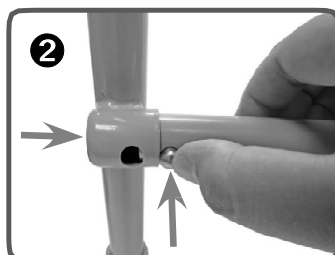

- ① 本体フレームを前脚ブラケットが向き合うように広げてください。
- ② 横棒を前脚ブラケットの位置まで持ち上げ、プッシュボタンを押しながらブラケットにカチッと音がして穴に確実にハマるまで差し込んでください。（左右2箇所）
- ③ 背パイプのプッシュボタンを押しながら後脚ブラケットにカチッと音がして穴に確実にハマるまで差し込んでください。（左右2箇所）
- ④ バケツをバケツ受けにセットします。座面をクランプ部分が後部フレームに合う位置に置き、クランプが後部フレームに完全に取り付けられるまで押し下げます。
- ⑤ 座面を下げた状態で、フタのクランプ部分が座面クランプ部分の両外側になる位置に置き、フタのクランプが後部フレームに完全に取り付けられるまで押し下げます。
- ⑥ 各脚の調節パイプを、プッシュボタンを押しながら希望の高さになるように上下にスライドさせて調節してください。


※③バケツと⑤フタを取り外し、座面の下に⑥スプラッシュガードをセットして、段差のない和式トイレの上に設置すると洋式トイレとして使用できます。



注意

- 組み立てや高さ調節を行う際には、指の挟み込みや怪我に十分ご注意ください。
- すべての脚は同じ高さに調節してください。高さが違うと転倒や事故の原因になります。
- 各脚のプッシュボタンが高さ調節穴に確実にハマっているか確認してください。確実にハマっていないと転倒や事故の原因になります。

（発売元）

 松吉医科器械株式会社

<https://www.matsuyoshi.co.jp>