

取扱説明書

製品を安全にご使用いただくために、この取扱説明書よくお読みになり、お読みいただいた後はお手元に保管してください。



注意

取り扱いを誤った場合に、人が怪我をおったり財産に損害を受ける恐れがある内容を示しています。

- 空気を入れすぎないで下さい。破損や破裂する恐れがあります。
- 火気や火花が出る器具の近くに設置しないでください。変形や破損、火災の原因になります。
- 火のついたローソクやタバコなどの火気、揮発性の引火物などを近づけないでください。変形や破損、火災の原因になります。
- 熱湯、アルコールでの消毒はしないでください。変色や破損の原因になります。
- お湯（水）を使用する用具ですので、周りの機器や備品に充分配慮しながらご使用ください。
- 被介護者の体調の変化に気を配り、体型がそぐわない方への本製品の使用はお控えください。
- 空気が抜けるなど製品の異常が見られる場合は使用を中止してください。

【商品仕様】


- 寸法：本体=W600×D550×H200mm、ケーブル=W500×D530mm、防水シート=700×600mm
排水チューブ長さ=830mm
- 重量：0.95kg ■材質：ポリ塩化ビニール ■構成：洗髪器本体、ケーブル、防水シート、収納バッグ、空気入れ

■各部の名称

排水チューブ

空気栓①

排水栓

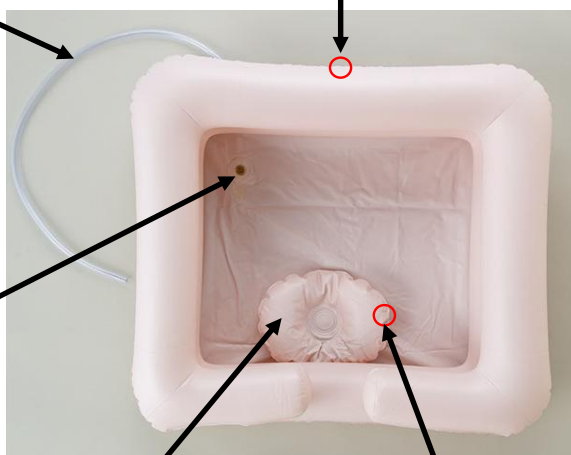

枕（本体一体）

空気栓②



収納バッグ

■組み立て方

- 空気栓①を引っ張り出し、フタをはずして付属の空気入れをしっかりと差し込んで、洗髪器本体に空気を入れてください。空気が入ったら空気入れをはずし、すばやくフタをして空気が漏れないようにして、空気栓を本体に押し込んでください。
- 空気栓②を引っ張り出し、フタをはずして付属の空気入れをしっかりと差し込んで、枕に空気をいれてください。空気が入ったら空気入れをはずし、すばやくフタをして空気が漏れないようにして、空気栓を枕に押し込んでください。
- 排水は排水栓のフタをはずして排水チューブから行います。バケツなどの受け容器をご用意ください。

■片づけ方

- ご使用後、本体、排水チューブをよく洗い流し、乾いた布で拭き取ってください。
- 空気栓①を引っ張り出し、フタをはずして根元をつまみ、逆止弁を開いて空気をぬいてください。
- 空気栓②を引っ張り出し、フタをはずして根元をつまみ、逆止弁を開いて空気をぬいてください。
- 乾燥させるのにドライヤーや熱風乾燥機を使用しないでください。
- 干すときは風通しのいい直射日光のあたらない場所で陰干ししてください。
- 乾燥してから付属の収納バッグで保管してください。

（発売元）



松吉医科器械株式会社

<https://www.matsuyoshi.co.jp>