


家庭用

保管用

MAX-CELL PRO

取扱説明書(保証書付)

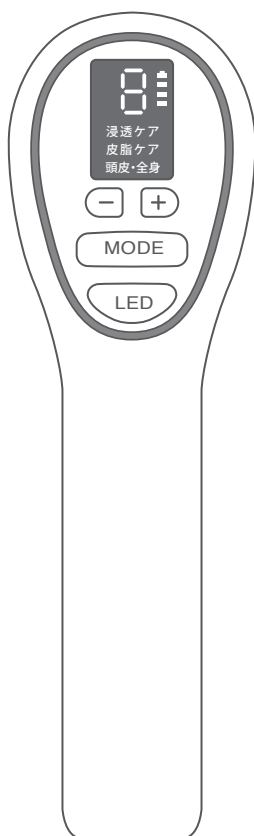

このたびはお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みいただき、正しくお使いください。
保証書付きですので大切に保管し、他の人に貸したり、譲渡する場合は必ず
この取扱説明書もお付けください。



もくじ

安全上のご注意	2~4
各部の名称	5
電源アダプターの接続方法	6
浸透ケアモードの使い方	7
皮脂ケアモードの使い方	8
頭皮・全身モードの使い方	9
LEDモードの使い方	10
使用上の注意	11
本体のお手入れ・保管場所	12
故障かな?と思ったら	13
アフターサービスについて	13
無料修理規定	14
保証書	

安全上のご注意

- ご使用前に本書を必ずお読みいただき、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、商品を正しくお使いいただき、使用される方や他の方への危険や損害を未然に防ぐためのものです。
- 誤った取扱いによって生じることが想定される内容を「危険」「警告」「注意」の3つで表示しております。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠危険 人が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容

⚠警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

⚠注意 人が傷害を負う可能性及び物的損害※の発生が想定される内容

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

⚠危険



禁止

<次のような医療用電子機器をお使いの場合は使用しない>

- ペースメーカー等の体内埋込型医療用電子機器
 - 人工心肺等の生命維持用医療用電子機器
 - 心電計等の装着型の医療用電子機器
- 医療用電子機器の誤作動を招く恐れがあります。

⚠警告



禁止

<次のような方は使用を避ける>

- 心臓疾患の方
 - 急性疾患の方
 - 有熱性疾患の方
 - 血圧異常の方
 - 結核症疾患の方
 - 悪性腫瘍の方
 - 顔面神経痛の方
 - 妊娠中の方
 - 知覚障害のある方
 - アトピー性皮膚炎の方
 - アレルギー体質の方
 - 特に肌が敏感な方
 - 血友病疾患の方
 - 顔面黒皮症の方
- ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている方

<次のような場合は使用を避ける>

- 生理中の場合
- 飲酒している場合
- 薬を服用中の場合
- 疲労が激しい場合

安全上のご注意

警告



禁止

<次の部位には使用しない>

- 喉仏 ●傷口（切傷などの外傷部位）
- 口の中等粘膜の部位 ●眼球、まぶた
- ニキビや吹出物で炎症を起こしている部位
- 痛覚、知覚等の傷害を起こしている部位
- 治療等で皮膚の下に金属、プラスチック、シリコン等を埋め込んである部位
- かゆみやほてり、物理的刺激などによる病的なシミのある部位
- 化粧品等で皮膚炎を起こしている部位
- ケロイド等の皮膚異常のある部位
- 過度の日やけでお肌がヒリヒリと炎症を起こしている部位
- 脱毛、剃毛直後の処理した部位
- レーザー治療等を受けた直後の部位
- 関節部位

<その他>

- 美容目的以外に使用しないでください。
- 交流100～240V以外の電源は使用しないでください。
- 火のそばや炎天下の場所で使用や保管をしないでください。
また、熱器具に近づけないでください。
- 電子レンジや高压容器に入れないでください。
- 本体やACアダプタを直接水の中に入れてたり、水をかけないでください。
浴室などの水分や湿気の多い場所で使用や保管をしないでください。
→内部に水が入り、故障やトラブルを招く恐れがあります。
- 濡れた手での使用や濡れた手でコンセントの抜き差しをしないでください。
- ACアダプタが傷んでいる場合は使用しないでください。
- 本体を落としたり、ぶつけたりしないでください。



分解禁止

- 本体の分解、改造、修理をしないでください。
また、針金等を機械の隙間から差し込まないでください。
→作動不良を起こし、事故やトラブルを招く恐れがあります。



必ず守る

- 本体に異音や異常が発生した場合、直ちに使用を中止してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 取扱説明書に記載されている用途以外には使用しないでください。
- 使用時間や使用頻度は取扱説明書の指示を守ってください。
- 痛みや不調を感じた場合はすぐに使用を中止してください。

安全上のご注意

⚠注意



禁止


- 付属のACアダプタ以外で充電しないでください。
また、付属のACアダプタで他の商品を充電しないでください。
- 他の美容器との併用はしないでください。
- ベンジン、シンナーなどで拭いたりしないでください。




必ず守る

- 1日の使用目安は、10～20分使用(例 朝:10分、夜10分)。
規定時間以上の使用はしないでください。
- 身につけているアクセサリ類や腕時計ははずして使用してください。
- ひどい肌荒れやお肌表面に凹凸がある場合には、まれに痛みを強く感じる
ことがあります。
その際には、痛みを感じた部位への使用は控えてください。
- 口周りのトリートメントの際、歯に金属をかぶせている部位などに違和感
を感じる場合があります。その際には、違和感を感じた部位への使用は
控えてください。
- 本体は電磁波部品を内蔵しているため、以下の点に注意してください。
 - ・ 磁気テープ、プリペイドカード、ICカード等に近づけないでください。
 - ・ パソコン、携帯電話、電子時計等の電子精密機器に近づけないでください。
 - ・ ペースメーカー等の医療用電子機器に近づけないでください。


各部の名称

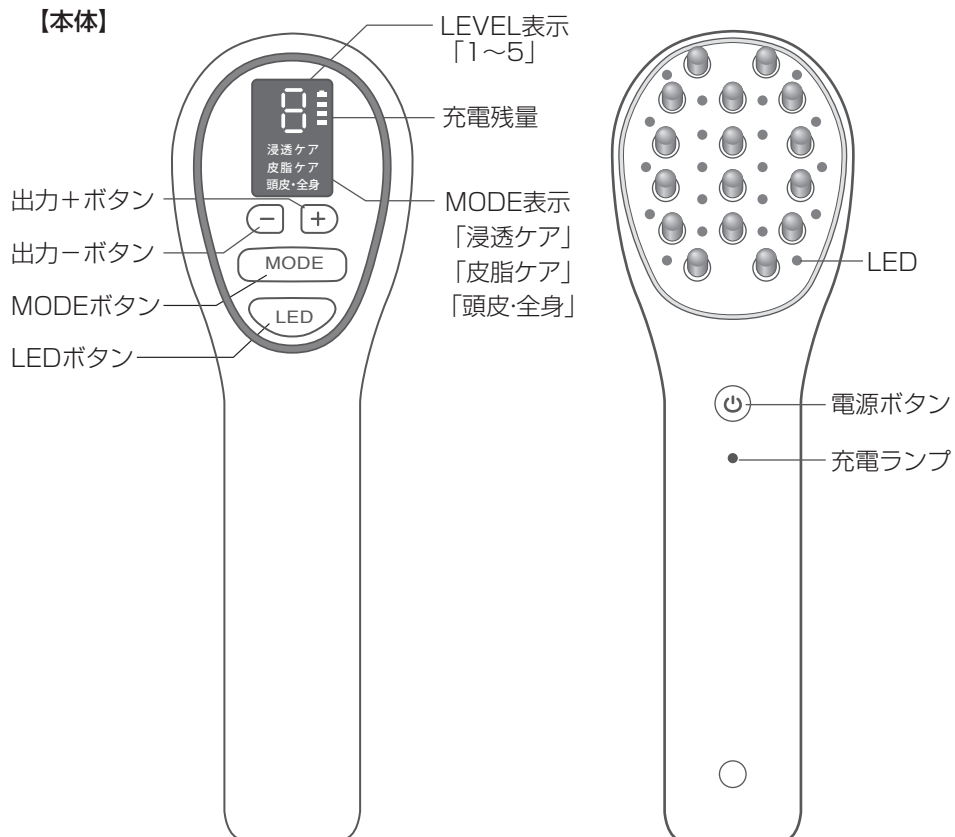

【電源アダプタ】

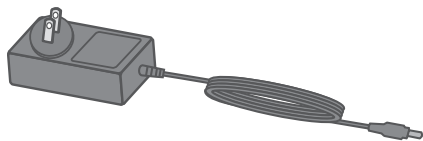


【専用ポーチ】

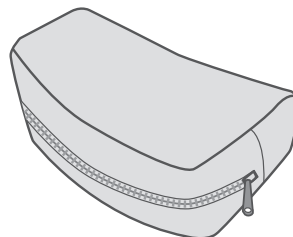

【定格仕様】

電源アダプター	5V 1A	定格周波数	50/60Hz
定格電圧	100~240V	消費電力(最大)	5W

電源アダプターの接続方法

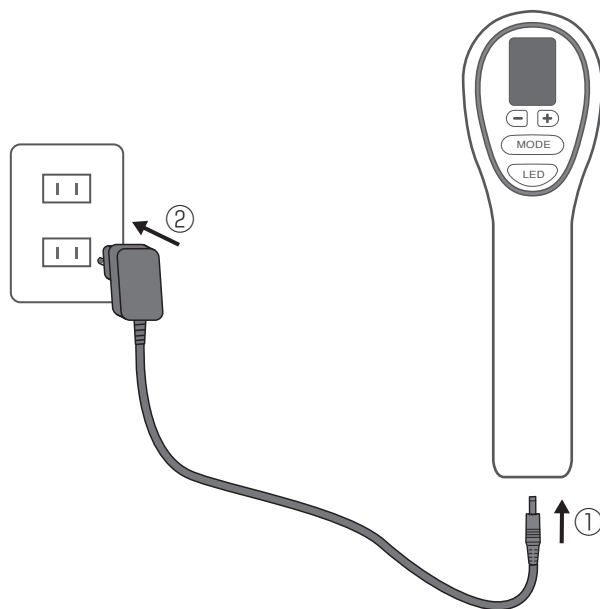

- ①アダプタープラグをアダプタージャックにゆっくり確実に差込んでください。
- ②充電中は充電ランプが点滅し、充電残量表示が流れるように点灯します。
充電が終わると消えます。

⚠注意

- ショートする恐れがありますのでアダプターをコンセントにセットする前に、アダプタープラグとアダプタージャックを先に接続してください。
- 感電をする恐れがありますので濡れた手で本体アダプターをコンセントにセットしないでください。
- 指定以外の電源アダプター以外はご使用にならないでください。事故や故障の原因となります。
- 電源アダプターの出力コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。出力コードが破損し、火災・感電の原因となります。
- 電源アダプターは専用のアダプター以外は使用しないでください。また、たこ足配線はしないでください。火災・感電の原因となります。

浸透ケアモードの使い方 ※トニックを使用します

●ご使用方法

- ①電源ボタンを長押しして電源をONにします。
- ②MODEボタンで浸透ケアモードを選びます。
- ③お好みに合わせて+、-のボタンでレベルを調節してください。

*浸透ケアは角質層まで


浸透ケアモードの操作手順

1. トニックを塗布し、地肌を湿らせてから使用してください。
2. 1日の目安は、10～20分使用(例 朝:10分、夜10分)
出力を適度に調整し、コーム部を地肌に軽く押さえるようにしてゆっくり動かしてください。

ポイント



トニック塗布後
ゆっくりと動かす

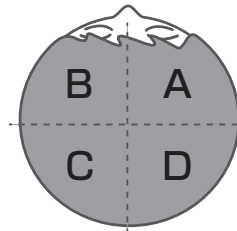

4等分にしてA→B→C→Dの順で
ケアすると全体的にムラなくケア
できます。

3. ご使用中に地肌が乾燥してきたら再度トニックをつけ、湿っている状態で使用してください。
※10分経過すると自動的に電源がOFFになります。
電源を切りたい場合は、電源ボタンを長押ししてください。

皮脂ケアモードの使い方

●ご使用方法

- ①電源ボタンを長押しして電源をONにします。
- ②MODEボタンで皮脂ケアモードを選びます。
- ③お好みに合わせて+、-のボタンでレベルを調節してください。

皮脂ケアモードの操作手順

1. 地肌をよく乾かしてからご使用してください。
※トニックなど何もつける必要はありません。
2. 1日の目安は、10～20分使用(例 朝:10分、夜10分)
出力を適度に調整し、こーム部を地肌に軽く押さえるようにして少し速めに動かしてください。

ポイント



地肌が乾いた状態で
少し速めに動かす

- ※10分経過すると自動的に電源がOFFになります。
電源を切りたい場合は、電源ボタンを長押ししてください。

頭皮・全身モードの使い方

●ご使用方法

- ①電源ボタンを長押しして電源をONにします。
- ②MODEボタンで頭皮・全身モードを選びます。
- ③お好みに合わせて+、-のボタンでレベルを調節してください。

頭皮・全身モードの操作手順

1. 気になる部位で（お好みに合わせてレベルを調整して）ご使用ください。
※P.3に記載している使用禁止部位には使用しないでください。
2. 1日の目安は、10～20分使用（例 朝：10分、夜10分）
出力を適度に調整し、コーム部を気になる部位に軽く押さえるようにして動かしてください。

顔に使用する場合

すべてのコーム部分が顔にあたるようにして、矢印に沿ってゆっくり動かす。


- 使用できない部位
まぶた、目のまわり、首中央



体に使用する場合

首やデコルテ（レベル1～2推奨）、また気になる部位（レベル1～刺激感覚に合わせて調整）を矢印に沿って動かす。

- 使用できない部位
胸部やデリケートな部位

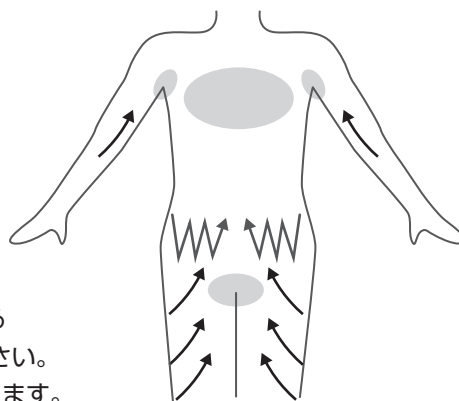

- ※胸部やデリケート部位、P.3に記載している
使用不可能部位には絶対に使わないでください。
※10分経過すると自動的に電源がOFFになります。
電源を切りたい場合は電源ボタンを長押ししてください。

LEDモードの使い方

●ご使用方法

- ①電源ボタンを長押しして電源をONにします。
- ②LEDボタンを押し、LEDモードのON/OFFを選びます。

LEDモードの操作手順

1. 気になる部位でご使用ください。
LEDモードは浸透ケア、皮脂ケア、頭皮・全身モードと一緒にご使用いただけます。

※10分経過すると自動的に電源がOFFになります。
電源を切りたい場合は電源ボタンを長押ししてください。

使用上の注意


⚠使用上の注意

- ご使用前にスイッチなどを操作し、機器が正常にかつ安全に作動するか確認してください。


⚠使用上の注意

- 揮発性・引火性のある化粧品・育毛剤などを皮膚や頭皮に塗布してご使用にならないでください。
- 皮膚の特に弱い方はご使用にならないでください。
- 目の周囲・粘膜または傷口などの部位にはご使用にならないでください。
- ご使用により、皮膚に発疹などの症状が現れた場合にはご使用を中止し、医師または薬剤師に相談してください。
- 放電による暖かな刺激効果以外の目的には、ご使用にならないでください。
- コーム部より火花放電しますので揮発性・引火性および燃えやすいものの近くではご使用にならないでください。
- ご使用中は他の金属物に触れたりしないでください。
- 刺激感が強すぎると感じる場合がありますが故障ではありません。刺激感が強すぎると感じた場合は、我慢せずに出力を下げてください。火傷の原因になります。
- 本器や体に異常を感じたら直ちにご使用を中止してください。


⚠ご注意

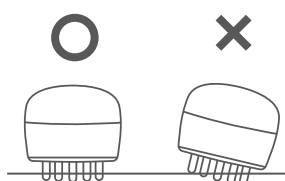

コーム部は頭皮に同時にあててください

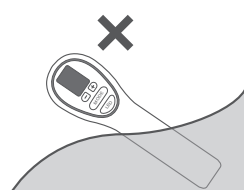

防水仕様ではありませんので水に浸けないでください

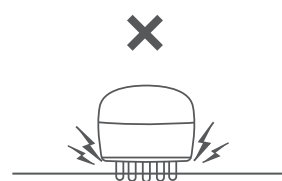


コーム部を頭皮に強く押しつけたりこすったりしないでください

本体のお手入れ・保管場所


本体のお手入れ

ご使用后、本体に付着した汚れは柔らかい布やティッシュなどでよく拭き取り、清潔な状態で本体を保管してください。


△注意 以下の点にご注意の上、本体のお手入れを行ってください。

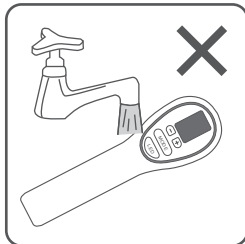

本体・アダプターを
水洗いしないで
ください

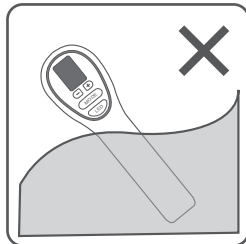

本体・アダプターは
防水仕様では
ありません。


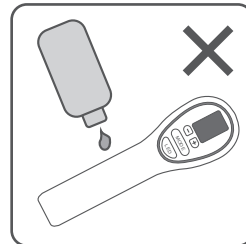


薬品類・洗剤は
ご使用にならないで
ください。

保管場所についてのご注意

風呂場・台所・火気の近くに保管しないでください。

△注意 長期間ご使用しない場合は以下の点にご注意の上、本体を保管してください。

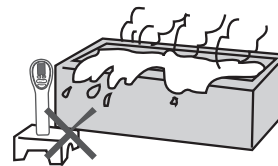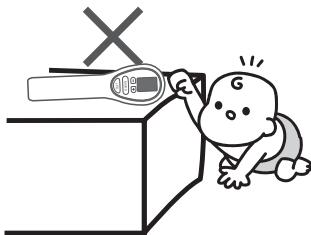

●乳幼児の手の届かない場所 ●直射日光当たらない場所 ●温度・湿度の高くない場所

故障かなと思ったら

下記の故障原因をよくお読みいただき、記載された内容に従いチェックをして頂き、故障の場合は、本体を分解などしないで発売元までご連絡ください。
また、本器およびパッケージなどをゴミとして廃棄する場合は、お住まいの市町村の定める区分に従ってください。

■電源が切れる

- 最後に操作をしてから10分以上経過していませんか？
→10分経過しますと、電源が自動的にOFFになります。

■電源が入らない

- コンセントプラグはコンセントにしっかり接続されていますか？
→接続し直してください。
- 電源がOFFになっていませんか？
→電源ボタンが消灯していたら、電源ボタンを長押ししてください。
- 画面の充電残量を確認してください。
→電源アダプターと本体を接続し、充電してください。



Li-ion

- 本製品には、リチウムイオン電池（バッテリー）を使用しています。不要になったバッテリーは貴重な資源を守るために廃棄せず、端子部をテープなどで絶縁して最寄りの電池リサイクル協力店へお持ちください。
- パッケージなどをゴミとして廃棄する場合は、お住まいの市町村の定める区分に従ってください。

アフターサービスについて

●保証書について

保証書は「お買い上げ日」等の記入をご確認のうえ、内容をよくお確かめになって大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日より1年になります。

●修理を依頼される前に

修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき再度ご点検のうえ、異常がある場合、お買い上げの販売店または発売元までご連絡ください。

●故障した場合の連絡について

お買い上げの販売店または発売元までご連絡ください。

●保証期間経過後の修理について

修理については、お買い上げの販売店または発売元にご連絡ください。保証期間終了後の修理は有料とさせていただきます。

●お問い合わせ窓口

株式会社毛髪クリニックリープ21
〒540-6122 大阪府大阪市中央区城見2-1-61 ツイン21MIDタワー22F

※お買い上げの販売店または発売元へご連絡の上、商品一式（本体・電源アダプタ）と一緒に保証書、故障内容とご返送先を書いたメモをお入れください。

無料修理規定（お買い上げ日より1年間）

1. 取扱説明書の注意書きに従って使用した状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。
 - ※ 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品（本体・電源アダプタ）と保証書をご持参ご提示いただくか、発売元にご連絡の上、商品（本体・電源アダプタ）と保証書、故障内容と返送先を書いたメモを同封し、お送りください。
保証期間内でも次の場合には原則として有料になります。
2.
 - ① 取扱説明書以外の使用上の誤りに起因する故障及び損傷
 - ② 不当な修理や改造による故障や損傷
 - ③ お買い上げ後の輸送・落下などによる故障及び損傷
 - ④ 一般家庭用以外（例えば業務用）に使用された場合の故障及び損傷
 - ⑤ 保証書のご提示がない場合
 - ⑥ 保証書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
 - ⑦ 車両・船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
 - ⑧ 火災・地震・水害・落雷・その他天変地異・異常電圧・指定外の使用電源（電圧・周波数）などによる故障および損傷
 - ⑨ 弊社以外で誤った修理をしたり、改造したために生じた故障及び損傷
3. 本保証書は、日本国内のみ有効です。

本保証書は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明な点は、お買い上げの販売店または、発売元までお問い合わせください。

保証期間経過後の修理については、P.13の「アフターサービスについて」をご覧ください。

保証書

製品名／ MAX-CELL PRO

製造番号／

保証期間／ **お買い上げ日より1年間**

お買い上げ日／ 年 月 日

※この保証書は、お買い上げ日から上記期間中故障が発生した場合に、
本書裏面の記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
詳細は裏面をご覧ください。

※ご記入いただいたお名前、ご住所、お電話番号等の個人情報は、
保証書のためだけに使用し、他の目的には利用いたしません。

お客様／

- ・お名前
- ・ご住所
- ・お電話番号

★販売店名／

- ・店舗名
- ・住所
- ・電話番号

総販売元
株式会社毛髪クリニックリーブ21
〒540-6122
大阪府大阪市中央区城見2-1-61 ツイン21MIDタワー22F

※必ず保管してください。