

機械器具42 医療用剥離子
JMDN コード: 70955000 婦人科用剥離子
一般医療機器
ピペット キュレット

再使用禁止

【警告】


1. 本品を使用する前に、添付文書の全項目を熟読すること。
2. 本品は医師及び医師の指示を受けた医療従事者のみが使用すること。

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止。
- ・妊婦には使用しないこと。

【形状・構造等】

本品は、本品は、先端を閉塞させ側孔を開けた透明な外筒部と採取用のスタイレット部からなる。外筒には先端部の深度を確認するためのインジケーターが付されている。

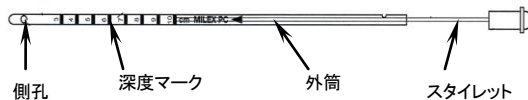


商品番号	仕様	包装
MX140	3mm	50本/箱

【使用目的】

本品は、子宮内膜の細胞診及び組織診等を行うための細胞採取に用いる。

【使用方法】

1. 包装から本品を取り出す。スタイレットのハンドルを持って取り出すこと。外筒採取側には触れないこと。
2. スタイレットと外筒を共に保持し、子宮腔内に挿入し深度マークを確認しながら、先端が子宮底に軽く触れるまで挿入する。(図 1)
3. 外筒を保持し、もう一方でスタイレットを引きながら回転させる。この際、先端の側孔部から外筒内に細胞が採取される。(図 2～4)
4. 外筒部の先端をはさみ等で切断し、採取した細胞を取り出す。(図 5)

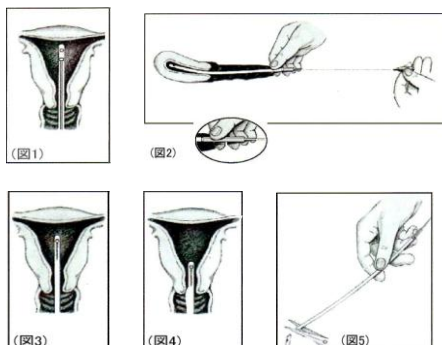

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

1. 使用前に破損等が無いことを確認して下さい。
2. 本品は EOG 滅菌済みにつき 1 回限りの使用です。再滅菌・再使用はしないで下さい。
3. 自己採集には使用しないこと。
4. 細胞採取時に組織に強く押し当てたり、無理に回転させないで下さい。

【貯蔵・保管方法】

1. 水ぬれに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所をさけて

室温で保管してください。

2. 使用期限は外箱に記載（自己認証による）。

【包装】

50本(箱)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者:

株式会社 フジメディカル
*〒160-0004 東京都新宿区四谷 4-1 細井ビル 5F
TEL: 03-3356-8377

外国製造業者:

クーバーサージカル社
Cooper Surgical, Inc.
アメリカ合衆国

FUJI MEDICAL CORPORATION
株式会社 フジメディカル