

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
JMDN コード: 70355000 送水吸引チューブ
一般医療機器

内視鏡下手術用送水・吸引チューブセット

再使用禁止

【警告】

1. 本品を使用する前に、添付文書の全項目を熟読すること。
2. 本品は医師及び医師の指示を受けた医療従事者のみが使用すること。[重篤な有害事象を生ずる可能性がある]

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 再滅菌禁止

【形状・構造等】

本品は、送水装置又は吸引装置と、内視鏡又は内視鏡用処置具等に接続し、持続的に送水・吸引を行う。
スパイク針、開閉用及び流量調整用のクランプのある送水チューブと、吸引チューブ、及びチューブを止めるために使用するためのマジックテープのセットである。


送水チューブ



吸引チューブ



マジックテープ

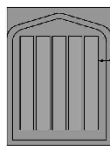

材質：ポリ塩化ビニル（可塑剤：フタル酸ジイソノニル）

【使用目的】

本品は、送水装置又は吸引装置と、内視鏡又は内視鏡用処置具等との接続に用いる柔軟性のあるチューブである。

【使用方法】

1. 本品は、包装開封後そのまま直ちに 1 回限り使用する。また再使用しないこと。
2. セットのクランプを閉じ、生食容器の用意をし、スタンド等に容器をつり下げる。
3. スパイク針カバーを取り外し、生食容器の所定の位置にまっすぐ根元まで刺通する。
4. クランプを操作して、本品の末端まで生食を満たし、空気を完全に除去し生食容器を加圧する。
5. 吸引チューブは、片方を吸引・洗浄管に接続し、もう一方を吸引器に接続する。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

1. 使用前に破損等が無いことを確認して下さい。
2. 本品は EOG 滅菌済みにつき開封後 1 回限りの使用です。再滅菌・再使用しないで下さい。
3. 本品は医師の指導や指示なしに使用することはできません。

【貯蔵・保管方法】

1. 水ぬれに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所をさけて室温で保管してください。

2. 使用期限は外箱に記載されています。

【包装】

10 セット(箱)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者:

株式会社 フジメディカル

〒160-0004 東京都新宿区四谷 4-1 細井ビル 5F

TEL: 03-3356-8377

外国製造業者:

パシフィックホスピタルサプライ社

Pacific Hospital Supply Co., LTD.

台湾

