



# バラし錠ず 取扱説明書

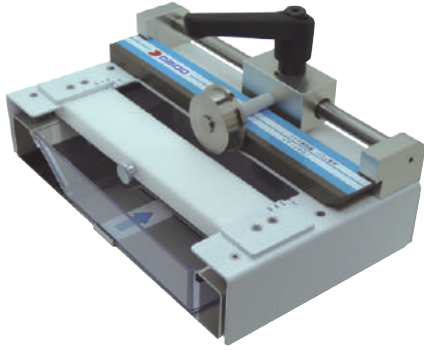

バラし錠ず  
HT-4001

## 《各部の名称》

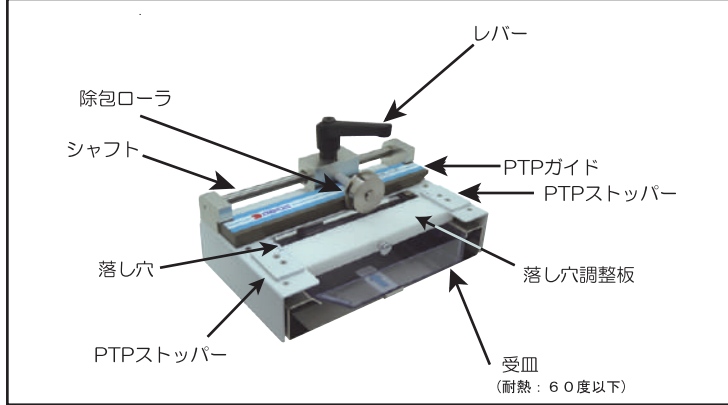

## DAIDO 大同化工株式会社

本社 / 〒570-0016 大阪府守口市 佐太中町4丁目19番15号  
TEL (06) 6901-1855 (代表) FAX (06) 6901-1910  
お問い合わせ e-mail info@daido-kako.com

大同化工株式会社  
調剤便利グッズホームページ <http://www.daido-kako.com/>

## 《バラし錠ず仕様》

機種	バラし錠ず
型番	HT-4001
対応範囲	錠剤・カプセル共用
本体	W214×D132×H137 (mm)
受皿	W120×D165×H27 (mm)
重量	1.6kg
材質	ステンレス アルミ スチール ナイロン ポリアセタール アクリル
機能方式	手動式
定価	68,000円 (税抜)

## 《注意事項》

- バラし錠ずを使用する際には、左手でPTPシートを落し穴調整板に押さえつけ、右手でレバーを持ちPTPシート上を押し滑らせる。
- PTPシートは、本説明書の使用方法のとおり保持して下さい。除包ローラに気を付けてPTPシートを保持して下さい。ケガや錠剤がでない原因となります。
- 錠剤・カプセルの種類によっては、上手く取り出せない場合や破損する場合がございます。本製品はすべての錠剤・カプセルに対応できる訳ではございませんのでご了承ください。
- 違う種類の薬剤を除包する際は、必ず受皿を取り出して前回の残りが無いかをご確認下さい。また、PTPシートのアルミ箔がはがれ、薬剤に混入する場合がございますので、除包された薬剤は必ず確認し、アルミ箔が混入した場合は取り除いてください。

## 《関連商品》

### 患者様にも

#### 《トリダスPRO》

直接、分包機の錠剤マスにお薬を撒くことができます。



製品名 トリダスPRO T0-100  
定価 3,800円 (税抜)

一包化の業務効率を大幅にUP




対応錠剤	直径 5mm ~ 10.5mm程度
対応カプセル	0号 ~ 5号

#### 《錠剤配分用ケース》

分包機など錠剤やカプセルを投入する際にケースや瓶に容易に移し換える便利品



製品名 ステルスケースミニ HS-002  
定価 1,980円 (税抜)

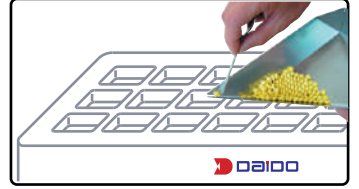

#### 《錠剤計数配分器》


- 目視で錠剤が数えやすい
- 監査がしやすい

錠剤を素早く数える



製品名 数えマス KYC-100  
定価 3,800円 (税抜)

※列の数を数えて計数表を参照し数えます。

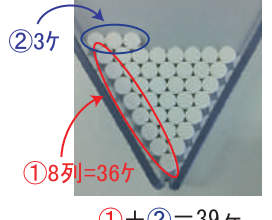

## 《製品保証書》

お客様名	
ご住所	(〒 - )
電話番号	( ) -
ご購入日	年 月 日
販売店名	
商品名	バラし錠ず HT-4001

### 【保証事項】

- 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買上げ日から1年間の保証期間内であれば、本体部分に限り無償修理致します。
- 保証期間内に故障して無償修理を受ける場合には、御施設名と電話番号をお申し出ください。尚、送付される場合には送料をご負担下さい。
- 保証期間内でも次の場合には有償となります。
  - 本保証書を同封頂けなかったとき。又は、所定事項に未記入があったとき。
  - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害による故障及び損傷。
  - お買上げ後の輸送、移動時の落下等、お取り扱いが不適当なために生じた故障及び損傷。
  - 説明書に記載の使用方法、または注意に反するお取り扱いによって発生した故障及び損傷。
  - 改造またはご使用の責任に帰すると認められる故障及び損傷。
  - 消耗部・消耗品類の交換
- 本製品故障またはその使用上生じたお客様の直接、間接の損害につきましては当社はその責に任じません。
- 保証は日本国内においてのみ有効です。

# 《ご使用方法》

## 対応薬品


錠剤：長径5mm～10mm

カプセル：0号～4号

※錠剤・カプセルの種類によっては上手く取出せない場合や破損する場合がございます。


## ① 受皿をセットする

受皿をセットします。傾斜部を正面に向かって左側に差し込んで下さい。

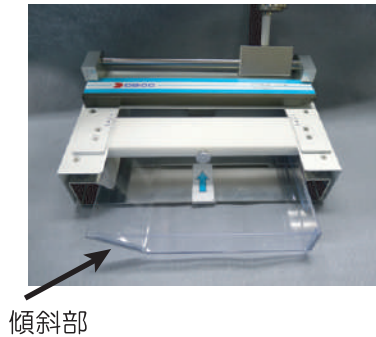


## ② 落とし穴調整板を合わせる

PTPシートをPTPガイドに沿って差し込みます。この際、錠剤の凸面がPTPガイド壁面に当たるまで差し込んで下さい。

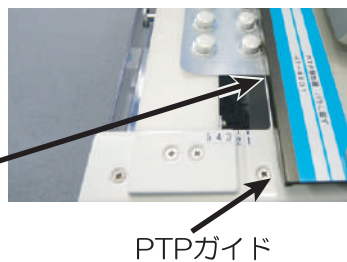

落とし穴調整板を薬と薬の間になるよう調整します。調整できる段階は5段階です。落とし穴調整板の左右のメモリが同じ数字になるように調整して下さい。

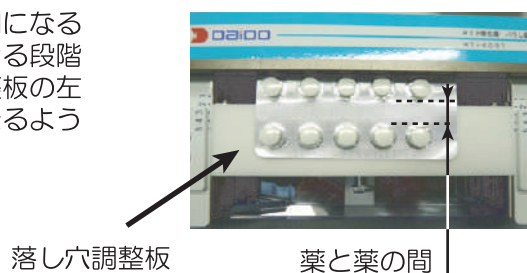

### 【ご注意点】


落とし穴調整板が除包する薬の下にあると妨害し薬が破損する場合がございます。

## ③ PTPをセットする

PTPシートをPTPガイドに沿ってPTPストッパーに当たるまで差し込んで下さい。

### 【ご注意点】

PTPストッパーに当たるまで差し込まないと最後の薬が除包できない場合がございます。

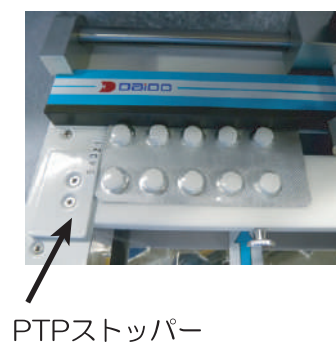

## ④ 除包する

- 左手でPTPシートを押さえます
- 右手でレバーを押し付けながら前方へ押し進めます。

### 【ご注意点】


レバーの動きがスムーズに動かなくなる場合がございます。その際はシャフトに潤滑油を塗布して下さい。

前へ押す



## ⑤ 受皿を取出す

除包完了後は薬をこぼさないよう受皿を上へ上げながら取出して下さい。

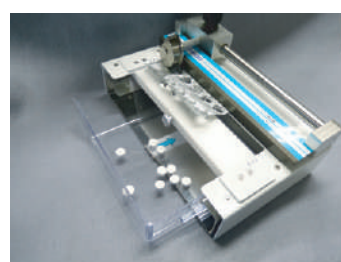


## ● 反対の列を除包する

1列を除包後PTPシートを180度回転させ向きを変えてからPTPシートをセットして下さい




## ● 3列PTPシート除包する場合

錠剤は最大4列まで除包できます。1列目を除包後、1列目をPTPガイドの中に挿し込んで下さい。

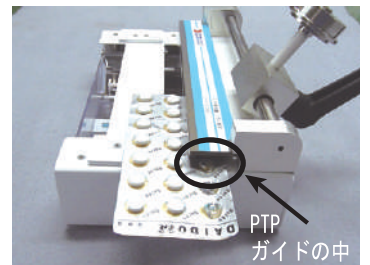


## ● カプセルを除包する場合

左記の②～⑤の手順で除包を行って下さい。

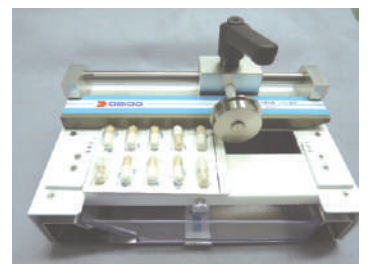


## ● 除包ローラを逆方向に引いて除包する場合

落とし穴調整板を薬と薬の間になるように調整し、PTPシートをPTPガイドに沿って差し込み、手前側のPTPストッパーに当たるまで押し当てて下さい。

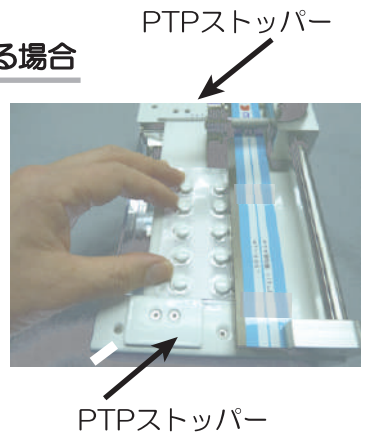


左手でPTPシートを押さえます。右手でレバーを押し付けながら逆方向に引いて除包して下さい

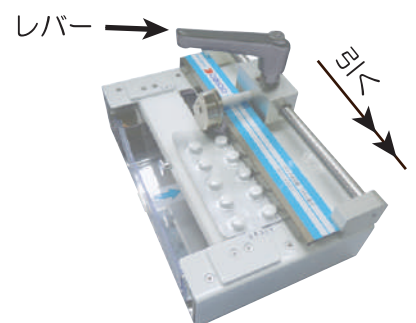

## ● ケガにご注意

除包ローラに指をはさまないようにご注意ください。ケガや錠剤・カプセルが取り出せない場合がございます。

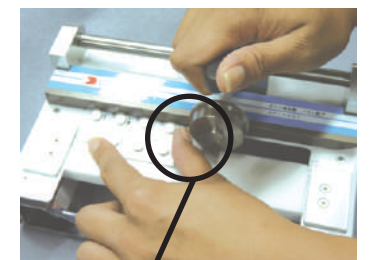

⚠ 指はさみにご注意ください

## ● 受皿のご使用方法

付属の受皿は、分包機の錠剤マスや装置瓶などに移し替えやすく傾斜を付けております。他のケースや容器などに薬を移し替える手間を軽減できます。保護シートははがしてお使い下さい

