


《組立説明書》

■ 静注台 B MY-2026

＜梱包内容＞

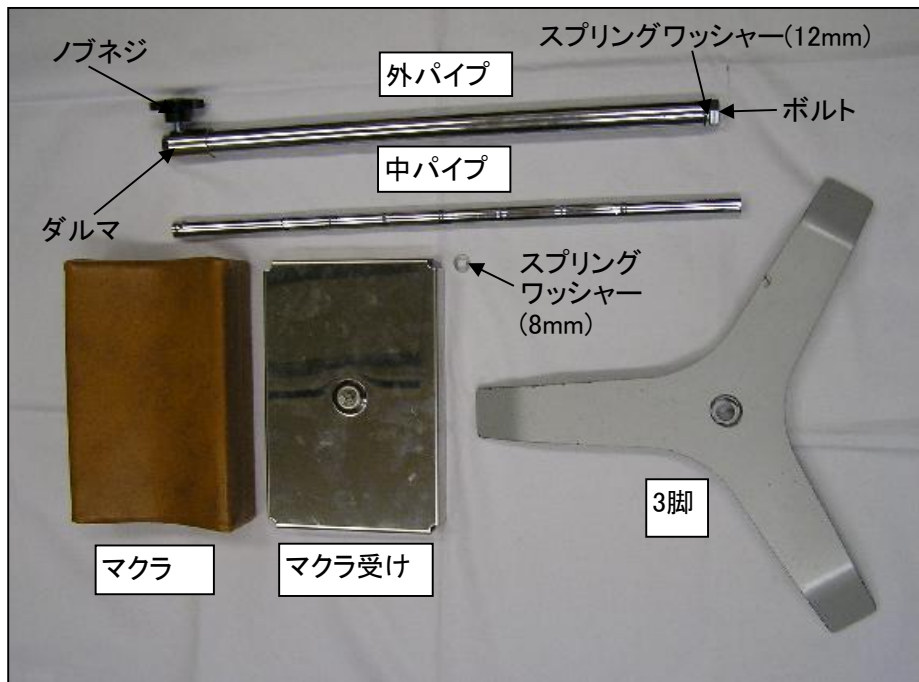

＜組立＞



1.
外パイプからスプリングワッシャー(12mm)とボルトを外します。
外パイプと3脚をスプリングワッシャー(12mm)・ボルトの順に固定します。



2.
マクラ受と中パイプをスプリングワッシャー(8mm)を挟んで固定します。

＜完成品＞



組立1・2を組み合わせて、マクラをマクラ受に設置します。
任意に高さを調整し、ノブネジでしっかり固定してください(中パイプの窪んでいる位置にて)。

松吉医科器械株式会社