

# Sigma Max Arm Sling

## シグマックスアームスリング

### 〈腕つり〉

#### —— 使用説明書 ——

このたびは本品をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。  
安全にご利用いただくために、必ずご使用前に本使用説明書をお読みください。  
また、本使用説明書はいつでもお読みになれるよう大切に保管してください。

#### 用 途

- 上肢の安静保持、保護

#### はじめにお読みください

- 本品の使用に際しては、必ず医師の指示に従ってください。
- 本品は使用状況により、必ずしも安静保持、保護できない場合があります。
- 本品は左右兼用です。
- 使用前にサイズが合っているか再度確認してください。サイズ表は本使用説明書のP.4にあります。

#### ご使用にあたって

- 素材の特性上、保管状態により変色することがあります。

## 使用上の注意—必ずお読みください—

本使用説明書では、安全に関わる注意事項をその危険の大きさの程度に応じて次のように分類しています。



**警告**… 誤った使い方をすると、人が重傷を負う可能性がある内容



**注意**… 誤った使い方をすると、人が軽傷を負うか、または本品以外の他の財物に損害を与える可能性がある内容



本品の使用に際しては、必ず医師の指示に従ってください。

異常の発生や症状の悪化を防ぐため、次の場合は医師に相談してください。

- アレルギー体質の方や皮膚が過敏な方。
- 装着部に傷、痛み、しびれ、腫れ、湿疹、かぶれなどの異常がある場合。

次のことを必ず守って正しく使用してください。正しく使用しないと、血行障害や負傷事故の原因となります。

- 上肢以外の部位に使用しないでください。
- サイズの合った製品を使用してください(サイズ表は本使用説明書のP.4にあります)。
- 就寝時の使用については、必ず医師の指示に従ってください。
- 上下、内側外側を正しく使用してください。
- 装着手順に従って正しく使用してください。
- ショルダーストラップをきつく締めすぎないでください。
- 使用中にゆるんだりずれたりしたときは、必ず手順の始めから正しく装着し直してください。
- 本品に摩耗、損傷のある場合は使用しないでください。
- バックルはカチッと音がするまでしっかりと差し込んでください。
- 本品の加工、改造、修理を行わないでください。
- 本品は個人用製の製品です。処方された方以外は使用しないでください。

本品のバックルおよびクリップはポリアセタール製です。負傷事故を防ぐため、次の場合は使用しないでください。

- 本品との接触により、他人を傷つけることが予想される場合。

本品の使用中に次の異常が発生した場合、ただちに使用を中止し、医師に相談してください。使用を続けると症状が悪化する原因となります。

- つげごちが悪いなど違和感がある場合。
- 装着部に怪我、骨折、傷、痛み、しびれ、腫れ、湿疹、かぶれなどの異常が生じた場合。



**注意**

本品は、汗や摩擦などにより色落ちや他の生地の色移りする場合があります。

## お手入れ方法



**注意**


色の薄いものと一緒に洗濯しないでください。色落ちや他の生地の色移りする場合があります。

- 本品は手洗いで洗濯できます。ていねいに押し洗いし、絞らないようにタオルなどで水気を取り、日陰で吊り干しにしてください。
- アイロン、塩素系漂白剤は使用しないでください。酸素系漂白剤は使用できます。
- 乾燥機は使用しないでください。製品をいためる原因となります。
- 本品はドライクリーニングできません。また、ウェットクリーニングはできますがタンブル乾燥は避けてください。

## 各部の名称

※本品は左右兼用です。


### 【製品の表側】

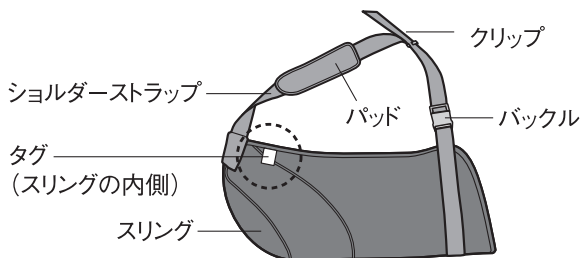


## 装着手順

- 装着前に本使用説明書P.2の【使用上の注意-必ずお読みください-】をよく読んでから、手順通り正しく装着してください。
- 以下の装着手順は右腕の場合です。左腕に装着する場合も同じように装着してください。


**1** バックルを取り外します。本品はタグのある方が内側になります。

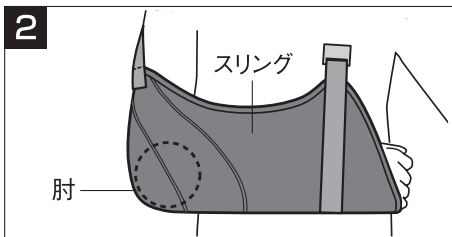


肘をスリングに奥までしっかりと入れます。

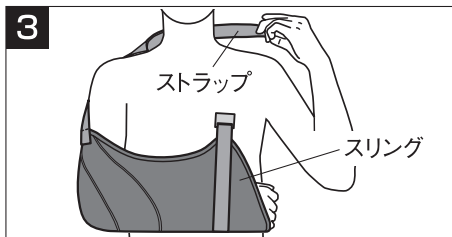

ショルダーストラップを、右肩の後方から背中  
にまわし、反対側の肩にかけます。

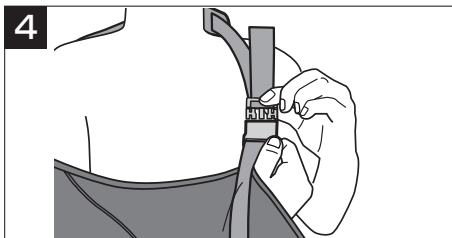

バックルの凸側を、凹側にカチッと音がする  
までしっかりと差し込みます。  
その際、バックルから出ているショルダース  
トラップの先端を前側に向けます。  
(本品は左右兼用のため、バックルは表裏  
どちらでも差し込むことができます)。

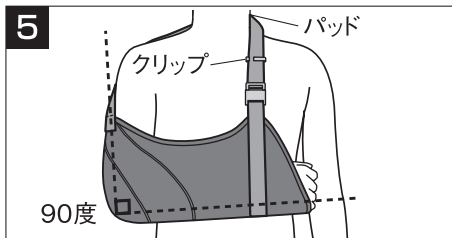

ショルダーストラップの長さを調節し、肘の  
角度が90度になるよう調節します。  
ショルダーストラップが長い場合は先端をク  
リップにはさんでください。  
ストラップの当たりが気になる場合は、パッド  
の位置を調節してください。

**6** 本体のゆるみやズレがないか、確かめてください。違和感がある場合は、再度、始め  
から装着し直してください。

## 装着完了時(右腕の場合)




## 素材

素材	
繊維	ポリエステル、その他
繊維以外	ポリアセタール、ポリエチレン

※お願い…本品を廃棄する際は、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。

## サイズ表

サイズ	適用参考値(前腕長)	1箱入数
子供用	～20cm	1コ
一般用	20cm～30cm	1コ

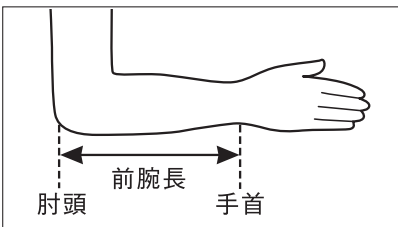

### ●サイズの選び方

前腕長に合わせて選んでください。前腕長は肘頭から手首までの長さを計測してください。計測値が2サイズのさかいになった場合は、大きい方のサイズを選んでください。

※製品の仕様、外観などは改良のため予告なく変更することがあります。

※製品には万全を期しておりますが、万一不良などお気づきの点がございましたら当社までご連絡ください。

**日本シグマックス株式会社**

〒163-6033 東京都新宿区西新宿6-8-1  
 お客様窓口 TEL.0800-222-6122(通話料無料)  
 受付時間：9時～17時(平日)※土日、祝日、年末年始を除く

2016.07(改版)  
168683