
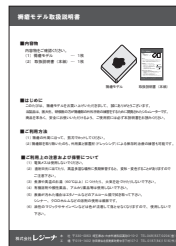


■ 内容物

内容物をご確認ください。

- (1) 褥瘡切除モデル … 1枚
- (2) 取扱説明書（本紙） … 1枚

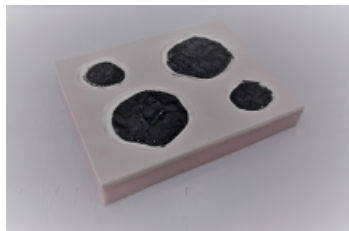

褥瘡切除モデル

取扱説明書（本紙）

■ はじめに

このたびは、褥瘡切除モデルをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

当製品は、血流の無い壊死組織の除去練習用に開発されたシミュレーターです。

安全にお使いいただけるよう、ご使用前には必ず本説明書をお読みください。

■ ご利用方法

- (1) 褥瘡切除モデルの底面は粘性があり、横滑りや浮き上がりが起こりづらい仕様になっています。底面の透明シートをはがし、BP-STAND2（別売り）の上に設置してください。
- (2) 褥瘡、皮膚、皮下を多層化構造になっていますので切除の深さを目視できます。褥瘡の外周に沿って、剪刃等でカット、除去してください。

■ ご利用上の注意および保管について

- (1) 電気メスは使用しないでください。
- (2) 直射日光に当てたり、高温多湿な場所に長期保管すると、変形・変色することがありますのでご注意ください。
- (3) 煮沸や高温のお湯（60℃以上）につけたり、火気を近づけたりしないで下さい。
- (4) 有機溶剤や酸性薬品、アルカリ薬品等は使用しないで下さい。
- (5) 表面が汚れた場合はエタノールなどのアルコール類で拭き取って下さい。
シンナー、クロロホルムなどの溶剤の使用は厳禁です。
- (6) 油性のマジックやサインペンなどは色が沈着して落とせなくなりますので、使用しないで下さい。