

この度は当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。


誤った組み立て方によって障害や物的損害を負わない為、次の通り正しく組み立てて下さい。

部品リスト	数量
座面	1
脚柱 (ボルト付き)	4
ワッシャー(丸)	4
スプリングワッシャー	4
取付ボルト(M10×25)	4

## ■組立順序

※組立工具：【17サイズのスパナ】をご用意ください

1. 座面を平らな場所に、座面裏側を上に向けて置きます。
  2. 座面裏側のフレームのコーナー部分に脚柱のボルトを差し込んでください。
  3. ワッシャー(丸)、スプリングワッシャー、取付ボルト(M10×25)の順に取付けてください。
- ※ 組立の際は、製品および床面を傷つけないようご注意ください。

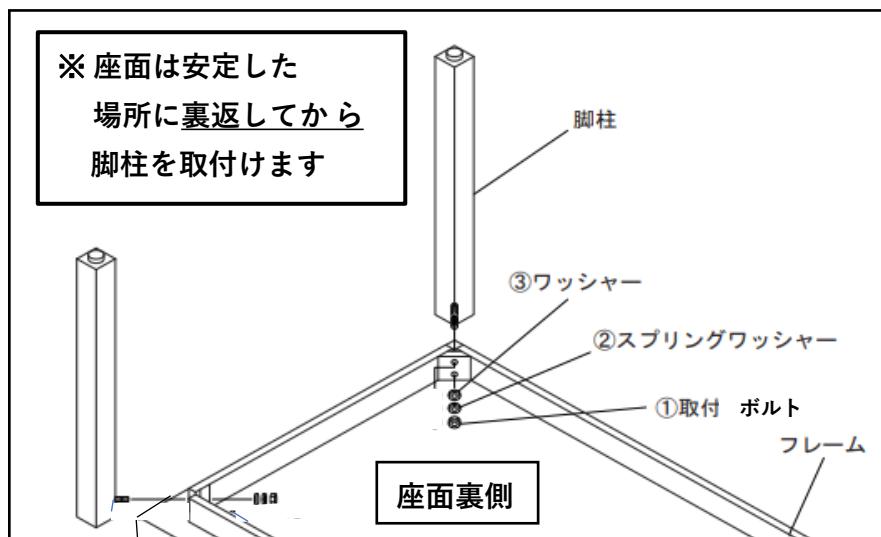

【発売元】

MATSUYOSHI 松吉医科器械株式会社  
<https://www.matsuyoshi.co.jp>