

バリアフリースケール

車イス用 AD-6106R ¥250,000(税抜)

取引・証明用
検定付

精度等級
3級



使いやすさはもちろん、移動や安全性を追求した車イス体重計

AD-6106R

3 Way走行

軽量設計

バリアフリースケール

AD-6106R 標準型 ¥250,000 (税抜)

取引・証明用
検定付

精度等級
3級

乗降性の良い計量台

- ✓ 秤量 200 kg
- ✓ 可動式のゆるやかなスロープと低い計量台で昇降もスムーズ
- ✓ 安全性を考慮した、エッジを排した丸みのあるデザイン
- ✓ 並んではかるときに便利、両側スロープ
- ✓ 計量台と表示機の接続は脱着可能なLANタイプのケーブル

万が一の断線時は、市販のLANケーブルで代用可能です

※ メーカー検証 3 m まで

次の測定者が後ろに並んでいても
測定後、そのまま前へ通り抜けが可能



使いやすい多機能表示器

- ✓ BMI計算機能
- ✓ 車イス引き(風袋引き)機能
- ✓ 外部機器との連携

※ 接続機器はお問い合わせください。



サーマルプリンタで高速印字

オプション プリンタ：ADプリンタユニット AD-PR580

プリンタ取付キット AD-PR580-008



- ✓ 表示器スタンド付き
- ✓ 立て掛けて保管や移動が可能

※ 保管に関しては取扱説明書をご参照ください。

AD-6106RL 表示機スタンドなし型 ¥198,000 (税抜)



軽量設計

重量：約25 kg → 約18 kg ※計量台
従来の強度をそのままに
大幅に軽量化を実現


持ち上げ移動も

ラク!
ラク!

軽量設計

- ✓ 軽くて強いハニカム(ハチの巣)構造

※ イメージ

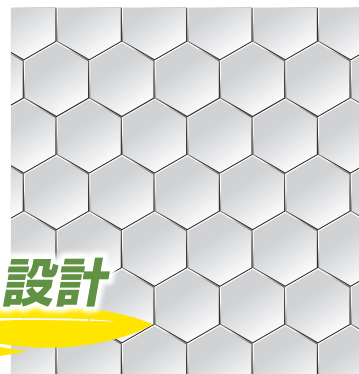

移動

大幅な軽量化で運び易さがさらに進化
大型キャスターで3Way走行

※ 移動に関しては取扱説明書をご参照ください。

✓ 表示器と計量台の接続ケーブルは脱着可能で移動時に邪魔しません。



設置・保管

丸みをもったやさしいデザインと軽量化されたボディ
安心感をもって移動や設置が可能です。

- ✓ 移動や設置時の負担を軽減、従来製品比で約3割の軽量化。
- ✓ エッジを極力なくしたデザイン。移動、設置頻度が多くても安心。
- ✓ 立て掛けて置けるので、省スペースで収納可能。


※ 収納時31.4 cm 収納に関しては取扱説明書をご参照ください。



設置時に手を痛めることも無い掴みやすい持ち手


エッジが少ないデザイン

体重計のコーナーやサイドも丸みを持ったデザイン

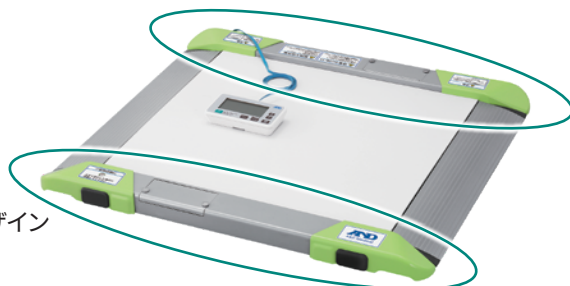

外形寸法図

單位:mm

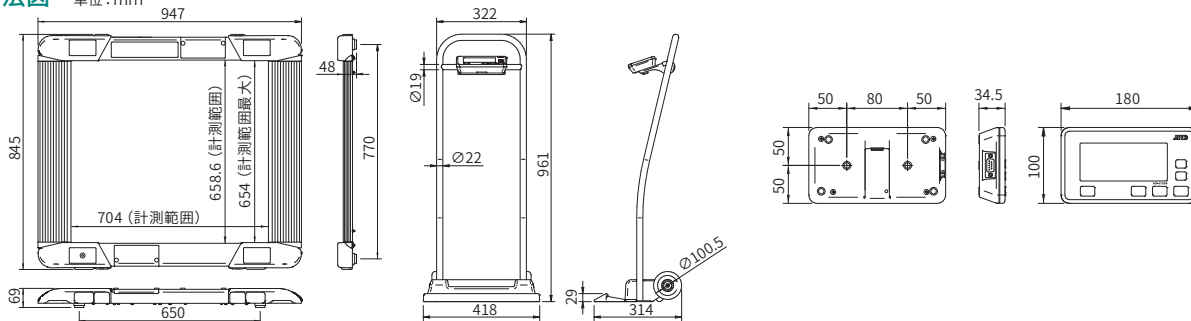

仕様

販売名	バリアフリースケール		
型名	AD-6106R	AD-6106RL	AD-6106RBLE
標準価格(税抜)	¥250,000	¥198,000	¥280,000
精度等級	3級		
承認番号	第D191号		
ひょう量	200 kg		
目量	100 g (～150 kg)	200 g (150～200 kg)	
最小測定値	2 kg		
最大減算風袋量	90 kg以下		
使用温湿度範囲	温度：5℃～35℃ 湿度：85％以下（結露なきこと）		
保存温度範囲	-10℃～60℃		
メイン表示	7セグメント液晶表示 メイン画面：文字高23 mm		
電源	ACアダプタ (AX-TB294) AC100 V, 50 Hz - 60 Hz または単一アルカリ乾電池4本		
乾電池寿命	200時間以上		
外形寸法	845 (W) × 947 (D) × 69～79 (H) mm		
計量部寸法	659 (W) × 704 (D) × 69～79 (H) mm		
本体質量	約18.0 kg		
通信機能	Dsub9 入出力×1：標準		Bluetooth® Low Energy
付属品	ACアダプタ (AX-TB294)、識別シール、取扱説明書、保証書		
商品コード	AD6106R	AD6106RL	AD6106RBLE
JANコード	4981046160315	4981046160865	4981046198790

※Bluetooth®は米国Bluetooth SIG, Inc.の商標および登録商標です。

使用地域区分

使用地域（都道府県）		使用地域区別 重力加速度の範囲
①	北海道	9.803～9.807 m/s ²
②	青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県	9.799～9.804 m/s ²
③	福島県、栃木県、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都（八丈・小笠原支庁を除く）、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県	9.796～9.801 m/s ²
④	群馬県、埼玉県、千葉県、東京都（全域）、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県（薩摩地方に限る）	9.794～9.799 m/s ²
⑤	鹿児島県（薩摩地方を除く）、沖縄県	9.789～9.794 m/s ²

2箇所に記載されている県は、どちらの重力加速度の範囲でも使用できます。

取扱説明書(通信仕様書含む)・製品説明動画はこちら

▼下記リンクから、閲覧項目をご選択ください。

<https://www.aandd.co.jp/adhome/products/me/ad6106r.html>



エコプロダクツ認定ラベル

環境配慮性に優れた製品を自社認定する「A&Dホロンエコプロダクツ認定制度」を導入し、認定基準を満たした製品に「エコプロダクツ認定ラベル」を付与しています。



本社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号

TEL. 03-5391-6127 (直) FAX. 03-5391-6129

札幌出張所 TEL. 011-251-2753 (代) FAX. 011-251-2759

仙 台 営 業 所 TEL. 022-211-8051 (代) FAX. 022-211-8052

名古屋営業所 TEL. 052-726-8763 (直) FAX. 052-726-8769

大 阪 営 業 所 TEL. 06-7668-3904 (直) FAX. 06-7668-3901

広島営業所 TEL. 082-233-0611 (代) FAX. 082-233-7058

福岡営業所 TEL. 092-441-6715 (代) FAX. 092-411-2815

お客様相談センター 購入前相談窓口 通話料無料

ご購入前の仕様確認や機種選定のご相談は **0120-707-188**

受付時間：月曜日～金曜日（※祝日、弊社休業日を除く 9:00～12:00/13:00～17:00）

！ 安全上のご注意：ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。