

The SEGUFIX[®]-System

セグフィックス 保護ベルト



腹部用ベルトセット



- 「セグフィックス保護ベルト」シリーズの基本となる腹部用ベルトとボタン・ピン・キーのロックシステムを加えたセットです。
 - 腹部用ベルトは、ベッドからの転落防止や安静が必要な場合等に使用します。
 - 腹部用ベルトには、寝返り調整ベルトが付いており、取り付け位置で患者の姿勢保持や動きの制限ができます。
- ※腹部用ベルトを使用する際は、必ず寝返り調整ベルトを使用してください。

腹部用ベルトセット

ツイストロックセット

コード	規格	価格(税抜)
① 23-7601-00	S	¥37,000
② 23-7601-01	M	¥37,000
③ 23-7601-02	L	¥37,000

パテントロックセット

コード	規格	価格(税抜)
④ 23-7611-00	S	¥33,300
⑤ 23-7611-01	M	¥33,300
⑥ 23-7611-02	L	¥33,300

■構成

	腹部用ベルト	ツイストボタン&ピン	ツイストキー	パテントボタン&ピン	パテントキー
①	S 1	3	2		
②	M 1	3	2		
③	L 1	3	2		
④	S 1			3	2
⑤	M 1			3	2
⑥	L 1			3	2

上半身用ベルトセット



- 上半身ベルトとボタン・ピンのセットです。
 - 上半身ベルトは、腹部用ベルトを装着した状態で、患者の動きによる腹部用ベルトからのすり抜けを制限したい場合に使用します。
- ※上半身用ベルトは単体では使用できません。必ず腹部用ベルトと組み合わせて使用してください。

上半身用ベルトセット

ツイストロックセット

コード	規格	価格(税抜)
① 23-7602-00	S	¥11,550
② 23-7602-01	M	¥11,550
③ 23-7602-02	L	¥11,550


パテントロックセット

コード	規格	価格(税抜)
④ 23-7612-00	S	¥10,200
⑤ 23-7612-01	M	¥10,200
⑥ 23-7612-02	L	¥10,200

■構成

	上半身用ベルト	ツイストボタン&ピン	パテントボタン&ピン
①	S 1	1	
②	M 1	1	
③	L 1	1	
④	S 1		1
⑤	M 1		1
⑥	L 1		1

上半身用取付ベルトセット

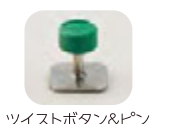

- 上半身用取付ベルトとボタン・ピンのセットです。
 - 上半身用取付ベルトは、ベッドからの起き上がりを制限する必要がある場合に使用します。
- ※上半身用取付ベルトは単体では使用できません。必ず腹部用ベルトと上半身用ベルトと組み合わせて使用してください。

上半身用取付ベルトセット

ツイストロックセット

コード	規格	価格(税抜)
① 23-7603-00	2本組	¥12,000

パテントロックセット

コード	規格	価格(税抜)
② 23-7613-00	2本組	¥9,700

■構成

	上半身用取付ベルト	ツイストボタン&ピン	パテントボタン&ピン
①	1	2	
②	1		2

手用ベルトセット



- 手用ベルトとボタン・ピンのセットです。
- 手用ベルトは、手の動きを制限する必要がある場合に使用します。
- ※手用ベルトは単体では使用できません。必ず腹部用ベルトと組み合わせて使用してください。

手用ベルトセット

ツイストロックセット

コード	規格	価格(税抜)
①23-7604-00	S	¥11,000
②23-7604-01	M	¥11,000
③23-7604-02	L	¥11,000

パテントロックセット

コード	規格	価格(税抜)
④23-7614-00	S	¥8,500
⑤23-7614-01	M	¥8,500
⑥23-7614-02	L	¥8,500

■構成

	手用ベルト	ツイストボタン&ピン	パテントボタン&ピン
①	S 2	2	
②	M 2	2	
③	L 2	2	
④	S 2		2
⑤	M 2		2
⑥	L 2		2



ツイストボタン&ピン

パテントボタン&ピン

足用ベルトセット



- 足用ベルト、足用取付ベルトとボタン・ピンのセットです。
- 足用ベルトと足用取付ベルトは、足の動きを制限する必要がある場合に使用します。
- 足用取付ベルトは、足用ベルトを使用する際に必要なベッドの取付ベルトです。
- ※足用ベルト、足用取付ベルトはそれぞれ単体では使用できません。必ず組み合わせて使用してください。

足用ベルトセット

ツイストロックセット


コード	規格	価格(税抜)
①23-7605-00	S	¥24,000
②23-7605-01	M	¥24,000
③23-7605-02	L	¥24,000

パテントロックセット

コード	規格	価格(税抜)
④23-7615-00	S	¥19,400
⑤23-7615-01	M	¥19,400
⑥23-7615-02	L	¥19,400

■構成

	足用ベルト	足用取付ベルト	ツイストボタン&ピン	パテントボタン&ピン
①	S 2	S 1	4	
②	M 2	M/L 1	4	
③	L 2	M/L 1	4	
④	S 2	S 1		4
⑤	M 2	M/L 1		4
⑥	L 2	M/L 1		4

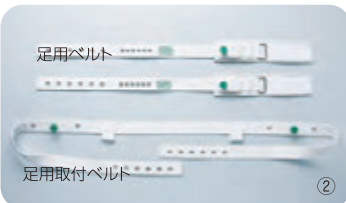

ツイストボタン&ピン

パテントボタン&ピン

全身用セット



- 「セグフィックス保護ベルト」シリーズの基本となる腹部用ベルトをはじめ、上半身用ベルト、手用ベルト、足用ベルト、足用取付ベルトとボタン・ピン・キーのロックシステムを加えたセットです。
- 全身の動きを制限する際に必要な製品が含まれています。

全身用セット

ツイストロックセット

コード	規格	価格(税抜)
①23-7600-00	S	¥83,100
②23-7600-01	M	¥83,100
③23-7600-02	L	¥83,100

パテントロックセット

コード	規格	価格(税抜)
④23-7610-00	S	¥71,500
⑤23-7610-01	M	¥71,500
⑥23-7610-02	L	¥71,500

■構成

	腹部用ベルト	上半身用ベルト	手用ベルト	足用ベルト	足用取付ベルト	ツイストボタン&ピン	ツイストキー	パテントボタン&ピン	パテントキー
①	S 1	S 1	S 2	S 2	S 1	10	2		
②	M 1	M 1	M 2	M 2	M/L 1	10	2		
③	L 1	L 1	L 2	L 2	M/L 1	10	2		
④	S 1	S 1	S 2	S 2	S 1			10	2
⑤	M 1	M 1	M 2	M 2	M/L 1			10	2
⑥	L 1	L 1	L 2	L 2	M/L 1			10	2



ツイストロックシステム




パテントロックシステム

綿パッド付き腹部用ベルト

内側に肌にやさしい純綿が付いた腹部用ベルト

- 肌触りが良く吸水性が高い純綿パッドを採用しています。
- 通気性が良く断熱性があるので冬に暖かく夏涼しい素材です。

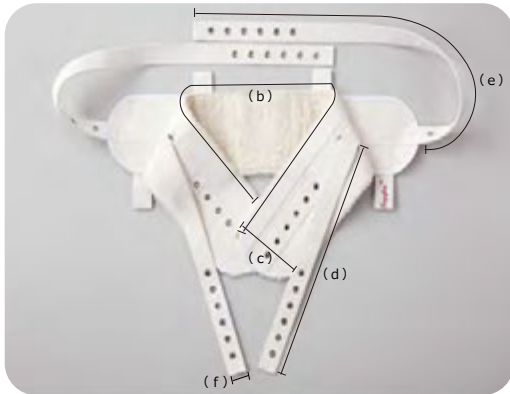

綿パッド付き腹部用ベルト

コード	規格	価格（税抜）
①24-7107-00	S	¥29,600
②24-7107-01	M	¥29,600
③24-7107-02	L	¥29,600


※腹部用ベルトを使用する際は、必ず寝返り調整ベルトを使用してください。

サイズ	①	②	③
(a) 全長	208cm	254cm	254cm
(b) 腹部ベルト有効長	51~83cm	76~118cm	115~157cm
(c) 腹部ベルト幅	14cm	18cm	18cm
(d) 寝返り調整ベルト長	58cm	58cm	58cm
(e) ベッド取付ベルト長	66cm	89cm	89cm
(f) ベルト幅	4.5cm	4.5cm	4.5cm

ムートンまもりカバー（腹部ベルト用）

肌にやさしいムートン素材

- 腹部用ベルトと併用して使用できます。
- 通気性が良く断熱性があるので冬に暖かく夏涼しい素材です。

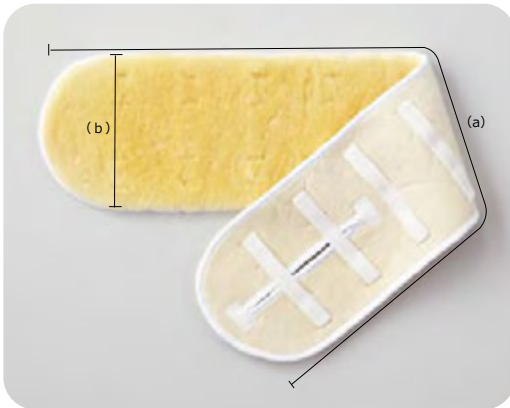

ムートンまもりカバー（腹部ベルト用）


コード	規格	価格（税抜）
①24-7108-00	S	¥9,000
②24-7108-01	M	¥12,000
③24-7108-02	L	¥13,000

サイズ	①	②	③
(a) 全長	96cm	131cm	162cm
(b) ベルト幅	20cm	23.5cm	24.5cm

車いす用手用ベルト

車いすからの転落防止ベルト

- 車いすの肘掛に手を固定することができます
- ※車いすの肘掛がベルトを固定することができる仕様であることを事前に必ず確認してください。

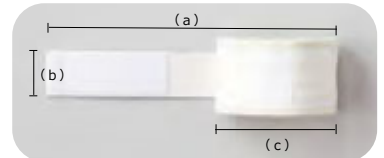

車いす用手用ベルト

コード	入数	価格（税抜）
①24-7109-00	1本	¥2,400

サイズ	①
(a) 全長	41cm
(b) ベルト幅	4.5cm
(c) ハンドカフ寸法	41×7.5cm

車いす用足用ベルト

車いすからの転落防止ベルト

- 車いすに足を固定することができます
- ※車いすはベルトを固定することができる仕様であることを事前に必ず確認してください。



車いす用足用ベルト

コード	入数	価格（税抜）
①24-7110-00	1本	¥9,000

サイズ	①
(a) 全長	111cm
(b) ベルト幅	4.5cm
(c) フットカフ寸法	51×7.5cm

【ストレッチャー用ベルトをご使用になる際の注意事項】

ストレッチャーにベルトをしっかりと固定できる箇所がフレーム部分等にあることを、使用する前に必ず確認してください。ストレッチャーの構造により、ベルトの固定ができない場合もあります。ストレッチャーのサイドレール部分等稼動する箇所へ固定はしないでください。

取付ベルトを固定した後、ギャッチアップ機能の利用やサイドレールの使用、ストレッチャー本体の移動、またはマットレスの移動などにより患者の固定状態が影響されるか否かを必ず確認してください。


患者の呼吸や両手、両足の血流が圧迫されないよう注意してください。

ストレッチャー用腹部用ベルト

ストレッチャーからの転落防止ベルト



- 固定ベルトとして患者の身体を固定することができます。
- 大腿部の固定にも使用可能。

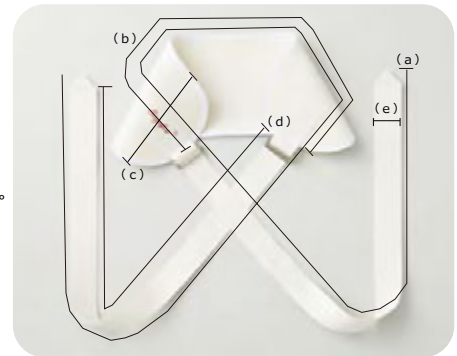

ストレッチャー用腹部用ベルト

コード	入数	価格（税抜）
① 24-7111-00	1本	¥13,000


サイズ	①
(a) 全長	240cm
(b) 腹部ベルト全長	58cm
(c) 腹部ベルト幅	7.5cm
(d) ストレッチャー本体取付ベルト長	91cm
(e) ベルト幅	4.5cm

ストレッチャー用手用ベルト

ストレッチャーからの転落防止ベルト



- 片手または両手を固定することができます

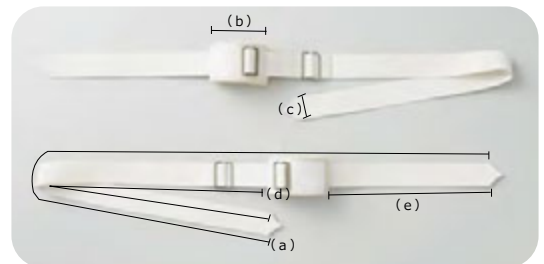

ストレッチャー用手用ベルト

コード	規格	価格（税抜）
① 24-7112-00	2本組	¥10,000


サイズ	①
(a) 全長	153cm
(b) ハンドカフ寸法	35×7.5cm
(c) ベルト幅	4.5cm
(d) ストレッチャー本体取付ベルト長	94cm
(e) 手取付ベルト長	34cm

ストレッチャー用足用ベルト

ストレッチャーからの転落防止ベルト



- 片足または両足を固定することができます

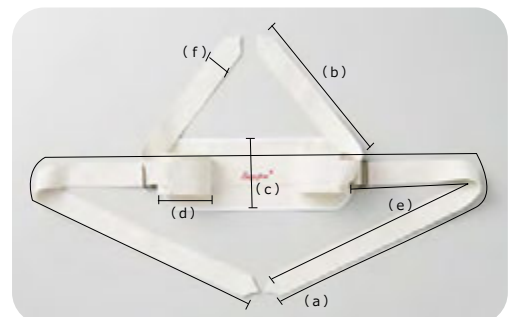

ストレッチャー用足用ベルト

コード	入数	価格（税抜）
① 24-7113-00	1本	¥20,000



サイズ	①
(a) 全長	186.5cm
(b) 足ベルト全長	38.5cm
(c) 足ベルト幅	14cm
(d) フットカフ寸法	36×7.5cm
(e) ストレッチャー本体取付ベルト長	74cm
(f) ベルト幅	4.5cm

単品パーツ

買い足しや買換えの際にご活用頂ける単品パーツを取り揃えております。

各ベルトを使用する際は、必ずセグフィックス社製ツイストロックシステムかパテントロックシステムと組み合わせてご使用ください。

- 「セグフィックス保護ベルト」シリーズの基本となる腹部用ベルトです。
- 腹部用ベルトには、寝返り調整ベルトが付いており、取り付ける位置で患者の姿勢保持や動きの制限ができます。

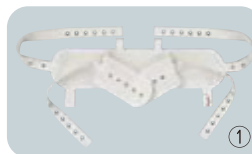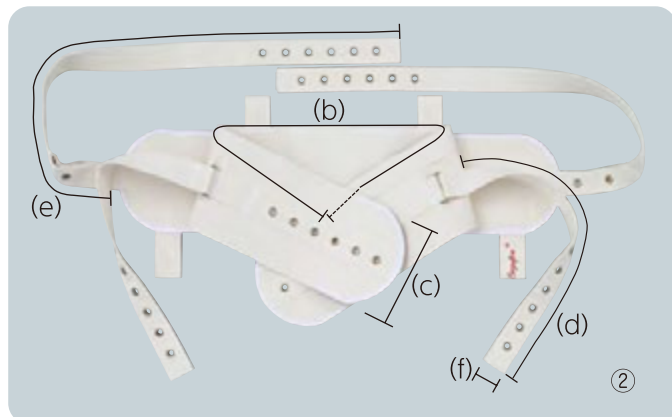


腹部用ベルト

コード	規格	価格(税抜)
①23-7621-00	S	¥26,350
②23-7621-01	M	¥26,350
③23-7621-02	L	¥26,350

※腹部用ベルトを使用する際は、必ず寝返り調整ベルトを使用してください。

	(a)全長	(b)腹部ベルト有効長	(c)腹部ベルト幅	(d)寝返り調整ベルト長	(e)ベッド取付ベルト長	(f)ベルト幅
①	208cm	51~83cm	14cm	58cm	66cm	4.5cm
②	254cm	76~118cm	18cm	58cm	89cm	4.5cm
③	254cm	115~157cm	18cm	58cm	89cm	4.5cm

- 腹部用ベルトを装着した状態で、患者の動きによる腹部ベルトからのすり抜けを制限する必要がある場合に使用します。

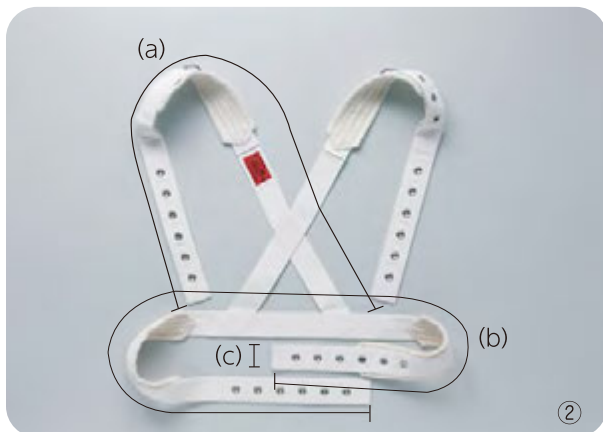

上半身用ベルト

コード	規格	価格(税抜)
①23-7622-00	S	¥8,900
②23-7622-01	M	¥8,900
③23-7622-02	L	¥8,900

※上半身用ベルトは単体では使用できません。必ず腹部用ベルトと組み合わせて使用してください。

	(a)肩部ベルト長	(b)下部ベルト長	(c)ベルト幅
①	85cm	118cm	4.5cm
②	100cm	145cm	4.5cm
③	117cm	165cm	4.5cm

- 腹部用ベルトと上半身用ベルトを装着した状態で、ベッドからの起き上がりを制限する必要がある場合に使用します。




上半身用取付ベルト

コード	規格	価格(税抜)
①23-7623-00	2本組	¥6,950

※上半身用取付ベルトは単体では使用できません。必ず腹部用ベルト・上半身用ベルトと組み合わせて使用してください。

	(a)全長	(b)ベルト幅
①	113cm	4.5cm

- 腹部用ベルトを装着した状態で、手の動きを制限する必要がある場合に使用します。

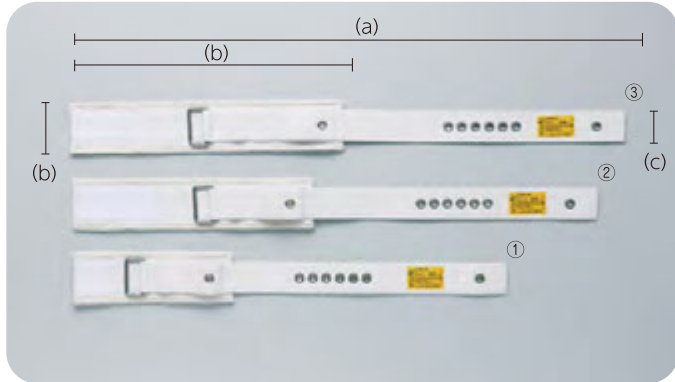


手用ベルト

コード	規格	入数	価格(税抜)
①23-7624-00	S	1本	¥2,850
②23-7624-01	M	1本	¥2,850
③23-7624-02	L	1本	¥2,850

	(a)全長	(b)ハンドカフ寸法	(c)ベルト幅
①	63cm	23×7.5cm	4.5cm
②	77cm	35×7.5cm	4.5cm
③	81cm	40×7.5cm	4.5cm

※手用ベルトは単体では使用できません。必ず腹部用ベルトと組み合わせて使用してください。

- 足の動きを制限する必要がある場合に足用取付ベルトと一緒に使用します。

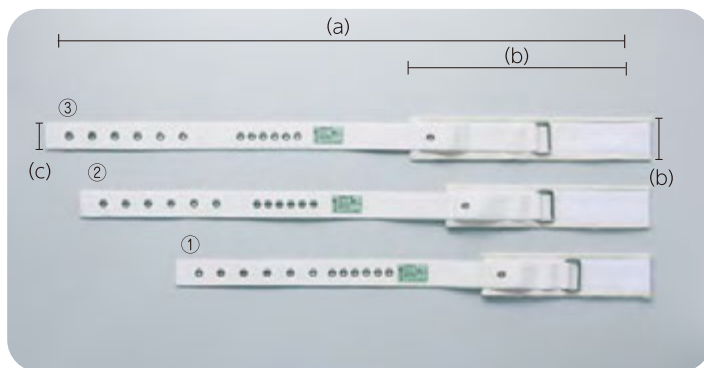


足用ベルト

コード	規格	入数	価格(税抜)
①23-7625-00	S	1本	¥4,000
②23-7625-01	M	1本	¥4,000
③23-7625-02	L	1本	¥4,000

	(a)全長	(b)フットカフ寸法	(c)ベルト幅
①	83cm	29×7.5cm	4.5cm
②	100cm	36×7.5cm	4.5cm
③	106cm	42×7.5cm	4.5cm

※足用ベルトは単体では使用できません。必ず足用取付ベルトと組み合わせて使用してください。

- 足用ベルトを使用する際に必要なベッドへの取り付け用のベルトです。

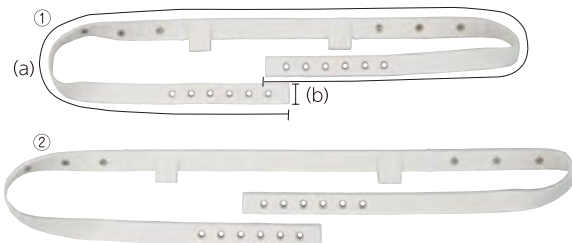

足用取付ベルト

コード	規格	価格(税抜)
①23-7626-00	S	¥6,950
②23-7626-01	M/L	¥6,950

	(a)全長	(b)ベルト幅
①	208cm	4.5cm
②	254cm	4.5cm

※足用取付ベルトは単体では使用できません。必ず足用ベルトと組み合わせて使用してください。

- 全身用セットをそのまま収納できるので、保管や携帯にも便利です



収納用バッグ

コード	サイズ	価格(税抜)
①24-6026-00	W420×D100×H260mm	¥7,800


●材質：ナイロン

クイックシリーズ

前もってベッドに取り付けておくことにより装着を素早く出来るタイプの医療施設用保護ベルトです。腹部ベルトを装着せずに保護することが可能です。

クイック上半身用ベルトセット

- 上半身ベルトとボタン・ピンのセットです。
- 上半身ベルトで、患者の上半身の動きを制限できます。

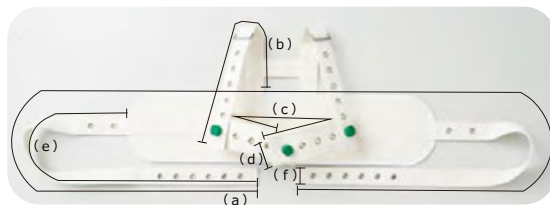

クイック上半身用ベルトセット ツイストロックセット



コード	規格	価格（税抜）
①24-7102-00	S	¥30,000
②24-7102-01	M	¥30,000
③24-7102-02	L	¥30,000

パテントロックセット

コード	規格	価格（税抜）
④24-7102-03	S	¥26,000
⑤24-7102-04	M	¥26,000
⑥24-7102-05	L	¥26,000

クイック上半身用ベルトのみ


コード	規格	価格（税抜）
⑦24-7102-10	S	¥20,000
⑧24-7102-11	M	¥20,000
⑨24-7102-12	L	¥20,000

サイズ	①④⑦	②⑤⑧	③⑥⑨
(a) 全長	252cm	252cm	252cm
(b) 肩部ベルト長	50cm	55cm	75cm
(c) 胸部ベルト長	81.5cm	126cm	160cm
(d) 胸部ベルト幅	7.5cm	7.5cm	7.5cm
(e) ベッド取付ベルト長	88cm	88cm	88cm
(f) ベルト幅	4.5cm	4.5cm	4.5cm

構成部品	①	②	③	④	⑤	⑥
クイック上半身用ベルト	S1	M1	L1	S1	M1	L1
ツイストボタン&ピン	5	5	5			
パテントボタン&ピン				5	5	5

クイック手用ベルトセット

- 手用ベルトとボタン・ピンのセットです。
- 手用ベルトで、患者の手の動きを制限できます。

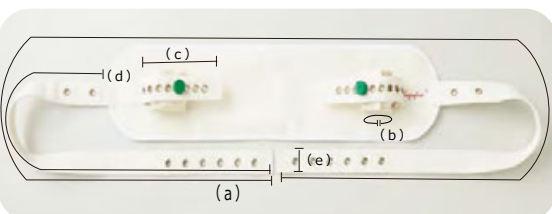

クイック手用ベルトセット ツイストロックセット



コード	規格	価格（税抜）
①24-7103-00	S	¥22,500
②24-7103-01	M	¥22,500
③24-7103-02	L	¥24,000

パテントロックセット

コード	規格	価格（税抜）
④24-7103-03	S	¥18,600
⑤24-7103-04	M	¥18,600
⑥24-7103-05	L	¥18,600

クイック手用ベルトのみ


コード	規格	入数	価格（税抜）
⑦24-7103-10	S	1本	¥12,000
⑧24-7103-11	M	1本	¥12,000
⑨24-7103-12	L	1本	¥15,000

サイズ	①④⑦	②⑤⑧	③⑥⑨
(a) 全長	252cm	252cm	252cm
(b) ハンドカフ寸法	23×7.5cm	36×7.5cm	36×7.5cm
(c) ハンドベルト長	53cm	68cm	74cm
(d) ベッド取付ベルト長	88cm	88cm	88cm
(e) ベルト幅	4.5cm	4.5cm	4.5cm

構成部品	①	②	③	④	⑤	⑥
クイック手用ベルト	S1	M1	L1	S1	M1	L1
ツイストボタン&ピン	4	4	4			
ツイストキー	1	1	1			
パテントボタン&ピン				4	4	4
パテントキー				1	1	1

クイック足用ベルトセット

- 足用ベルトとボタン・ピンのセットです。
- 足用ベルトで、患者の足の動きを制限できます。

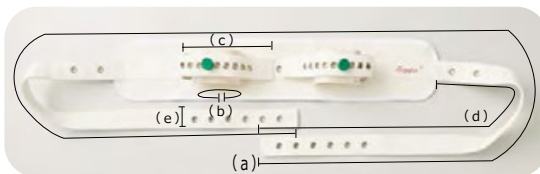

クイック足用ベルトセット ツイストロックセット



ツイストボタン&ピン パテントボタン&ピン

コード	規格	価格（税抜）
①24-7104-00	S	¥25,000
②24-7104-01	M	¥25,000
③24-7104-02	L	¥27,000

パテントロックセット

コード	規格	価格（税抜）
④24-7104-03	S	¥21,000
⑤24-7104-04	M	¥21,000
⑥24-7104-05	L	¥21,000

クイック足用ベルトのみ


コード	規格	入数	価格（税抜）
⑦24-7104-10	S	1本	¥12,000
⑧24-7104-11	M	1本	¥12,000
⑨24-7104-12	L	1本	¥15,000

サイズ	①④⑦	②⑤⑧	③⑥⑨
(a) 全長	252cm	252cm	252cm
(b) フットカフ寸法	31×7.5cm	36×7.5cm	41×7.5cm
(c) フットベルト長	60cm	93cm	98cm
(d) ベッド取付ベルト長	88cm	88cm	88cm
(e) ベルト幅	4.5cm	4.5cm	4.5cm

構成品	①	②	③	④	⑤	⑥
クイック足用ベルト	S1	M1	L1	S1	M1	L1
ツイストボタン&ピン	4	4	4			
ツイストキー	1	1	1			
パテントボタン&ピン				4	4	4
パテントキー				1	1	1

クイック大腿部用ベルトセット

- 大腿部用ベルトとボタン・ピンのセットです。
- 大腿部用ベルトで、患者の大腿部の動きを制限できます。

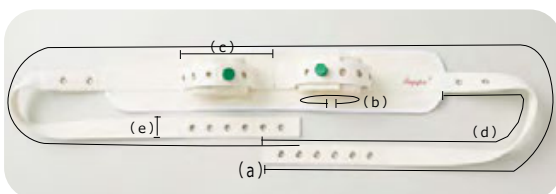

クイック大腿部用ベルトセット ツイストロックセット



ツイストボタン&ピン パテントボタン&ピン

コード	規格	価格（税抜）
①24-7105-00	S	¥28,300
②24-7105-01	M	¥28,300
③24-7105-02	L	¥28,300

パテントロックセット

コード	規格	価格（税抜）
④24-7105-03	S	¥24,000
⑤24-7105-04	M	¥24,000
⑥24-7105-05	L	¥24,000

クイック大腿部用ベルトのみ

コード	規格	入数	価格（税抜）
⑦24-7105-10	S	1本	¥18,000
⑧24-7105-11	M	1本	¥18,000
⑨24-7105-12	L	1本	¥18,000

サイズ	①④⑦	②⑤⑧	③⑥⑨
(a) 全長	254cm	256cm	256cm
(b) 大腿部カフ寸法	39.5×7.5cm	70×7.5cm	75×7.5cm
(c) 大腿部ベルト長	91cm	135cm	156cm
(d) ベッド取付ベルト長	90cm	90cm	90cm
(e) ベルト幅	4.5cm	4.5cm	4.5cm

構成品	①	②	③	④	⑤	⑥
クイック足用ベルト	S1	M1	L1	S1	M1	L1
ツイストボタン&ピン	4	4	4			
パテントボタン&ピン				4	4	4

クイック全身用セット


- 基本となる腹部用ベルトなしでも全身の動きを制限できるセットです。



ツイストロックシステム



パテントロックシステム

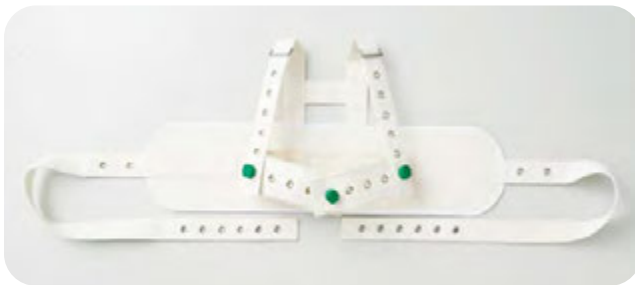

クイック上半身用ベルト



クイック手用ベルト



クイック足用ベルト



クイック大腿部用ベルト

クイック全身用セット ツイストロックセット

コード	規格	価格（税抜）
① 24-7106-00	S	¥109,500
② 24-7106-01	M	¥109,500
③ 24-7106-02	L	¥109,500

パテントロックセット

コード	規格	価格（税抜）
④ 24-7106-03	S	¥89,500
⑤ 24-7106-04	M	¥89,500
⑥ 24-7106-05	L	¥89,500

構成	①	②	③	④	⑤	⑥
クイック上半身用ベルト	S1	M1	L1	S1	M1	L1
クイック手用ベルト	S1	M1	L1	S1	M1	L1
クイック足用ベルト	S1	M1	L1	S1	M1	L1
クイック大腿部用ベルト	S1	M1	L1	S1	M1	L1
ツイストボタン&ピン	17	17	17			
ツイストキー	2	2	2			
パテントボタン&ピン				17	17	17
パテントキー				2	2	2



セグフィックス カラー識別システム

「セグフィックス保護ベルト」は、使用する部位に応じて『カラー識別システム』を採用しています。

赤・黄・緑の3色で使用する部位を分類。

各製品には、それぞれのカラー識別ラベルが表示されています。

ラベルのカラーによって製品の使用部位を容易に識別できますので、使用時の製品の混在や使用部位の間違いを防ぎます。

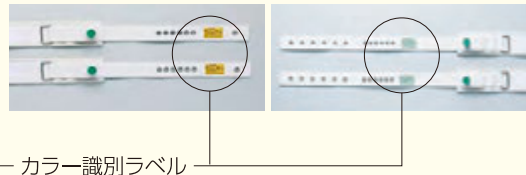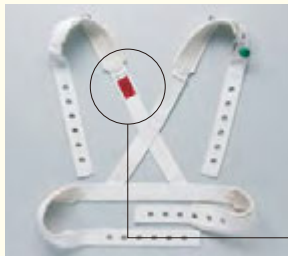

カラー識別ラベル




赤：上半身



黄：腹部・手



緑：足

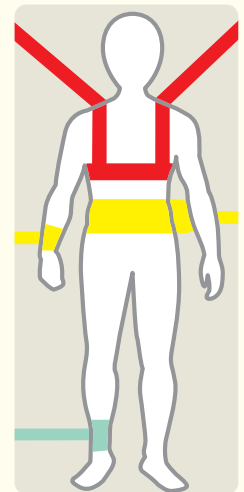

セグフィックス ロックシステム

ベッドへの取り付けやベルトの装着時に使用する、ツイストロックシステムとパテントロックシステムは、製品をより安全にご使用頂くためのセグフィックス独自のロックシステムです。

どちらのタイプも、ピンにボタンを差し込むことで簡単にロックできます。

ロックされた状態で、ボタンをピンから外すことはできません。

ボタンをピンから外す場合は、それぞれ専用キーを使用します。

【ツイストロックシステム】



ツイストロックシステム

品名	コード	サイズ	価格(税抜)
①ツイストボタン&ピン	23-7630-00	—	¥ 2,700
②ツイストボタン	23-7631-00	φ2.3×H1.3cm	¥ 1,800
③ツイストピン	23-7632-00	3.6×3.6×H3.4cm	¥ 1,000
④ツイストキー	23-7633-00	φ2.7×H5.7cm	¥ 1,600

【パテントロックシステム】



パテントロックシステム

品名	コード	サイズ	価格(税抜)
①パテントボタン&ピン	23-7640-00	—	¥ 1,400
②パテントボタン	23-7641-00	φ2.5×H1.3cm	¥ 1,000
③パテントピン	23-7642-00	φ2.3×H3.4cm	¥ 500
④パテントキー	23-7643-00	φ2.2×H3.7cm	¥ 1,400

【ロックシステム 使用上の注意】

- ツイストロックシステムとパテントロックシステムに互換性はありません。異なるボタン・ピン・キーを組み合わせることはできません。
- 他社製品と組み合わせることはできません。
- ご使用の前に必ず、ボタン・ピン・キーの組み合わせが正しいか、適切にロックができるか、キーを使用して適切に取り外しができるか、確認してください。取り外しが適切にできない場合は、直ちに新しいボタン・ピン・キーに交換してください。
- ロックシステムは水濡れに注意してご使用ください。水に濡れると適切にロック・取り外しができなくなります。
- ロックシステムは継続使用により劣化を招く可能性があります。ご使用前に必ずロック状態を確認し、適切にロック・取り外しができない場合は、直ちに新しいボタン・ピン・キーに交換してください。
- ボタンに強い力が加わったり、常に引っ張られるような使用状況において、適切なロック状態を保つことや取り外しが困難になる可能性があります。
- 正しく取り外しできない場合、またキーを紛失した場合は、ベルトをハサミやベルトカッターで切断して「セグフィックス保護ベルト」を取り外してください。

【注意事項 ～ご使用条件～】

- 「セグフィックス保護ベルト」は、医療施設において、ベッドからの転落防止や動きの制限、姿勢保持等、患者の安全対策の一つの手段として使用される製品です。
- 医療法等の関連する法令や告示等に従い、使用環境が整備されている医療施設において、医師が必要と判断する場合に、医師の管理・監督下で使用できます。
- 使用方法等を十分に理解し、取り扱いを熟知した医師・看護師がご使用ください。
- 個人や在宅での使用はできません。
- ご使用の際は、各施設にて定められたガイドラインや手順・ルール等に従って、適切に使用してください。
- 本製品を使用中は、見回りの回数を増やす等、常に患者の状態と製品の状態を監視・確認してください。異常がある場合は直ちに使用を中止してください。
- 本製品を使用する際は、上記使用条件を守り、適切に使用してください。誤って使用すると、重大な怪我を引き起こしたり、生命に関わる事故に繋がる可能性があります。

【注意事項 ～ご使用の前に～】

- ご使用の際は、患者や製品に損傷をきたす可能性のある物（眼鏡、腕時計、ネックレス等の装飾品、鋭利な物等）、ロックシステムに影響を及ぼす磁気を有する物を周囲に置かないでください。
- 本製品は耐火素材ではありません。タバコ等の火気を近づけたり、火気の近くで使用しないでください。
- 本製品のロックシステムには磁気を使用しています。ペースメーカー等、磁気の影響を受ける機器を使用している患者には使用しないでください。また磁気の影響を受ける医療機器等の近くで使用しないでください。
- 本製品を分解・改造したり、また修理を行って使用しないでください。
- 本製品は、他社製品との併用やパーツを混在して使用することはできません。他社製品と一緒に使用しないでください。
- ご使用の前に、必ず本体ベルトの点検・確認を行い、不具合のある製品は使用しないでください（製品の破損、劣化、ホツレ等）。
- 不具合のある製品を使用すると重大な事故に繋がる可能性があります。
- ご使用の前に、必ずロックシステムの点検・確認を行い、不具合のある製品は使用しないでください（ボタン・ピン・キーの組み合わせ、正しくロックするか、キーにより正しく解除できるか等）。
- 不具合があると、正しくロックされない、正しくロックが解除できない等の現象により、重大な事故に繋がる可能性があります。

【注意事項 ～使用上の注意～】

- 医師の指示に従い、使用目的や患者の状態により、使用する製品および使用方法を決定してください。
- 患者の体型や使用する部位に応じて適切なサイズを使用してください。また、ベルトを留める際も使用方法や患者の体型に応じて適切な位置で留めてください。サイズの合わない製品を使用したり、ベルトを留める位置が適切でないと、重大な事故に繋がる可能性があります。
- ご使用の際は製品を正しく装着し、各ベルトの緩みが適切な状態に保たれているか、定期的に確認を行ってください。
- ベルトを締めすぎると呼吸や循環を妨げ、重大な事故に繋がる可能性があります。ベルトが緩すぎるとベルトからのすり抜けや絡まり、ベッドからの転落等、重大な事故に繋がる可能性があります。
- 本製品の使用中は、常に患者の状態を監視し、異常がある場合は直ちに使用を中止してください。

- 災害等の緊急時には、ベルトをハサミやベルトカッターで切断して製品を取り外してください。

【注意事項 ～ベッド取り付け時の注意～】

- ベッドに取り付ける際は、取付ベルトをベッドフレームの適切な位置に取り付け、ロックシステムでしっかりと留めてください。
- 取付ベルトは、ずれたり滑らないようしっかりとベッドに取り付けてください。適切に取り付けられていないと、ベッドからの転落等の重大な事故に繋がる可能性があります。
- 取付ベルトは、ベッドの可動に対して影響を受けない位置に取り付けてください。
- 高さ調節やギャッチ機能のあるベッドに取り付ける場合は、ベッドを可動させずに使用することで、より安全性が高まります。
- 取付後に、ベッドの高さ調節やギャッチ機能を使用する可能性のある場合、ベッド機能への影響や可動時のベッドフレームの動きに伴う製品への影響、ベルトの締め付けや緩み等を十分に検討・確認した上で、取り付け位置を決定してください。
- ベッドサイドレールを使用する際は、必ず先にサイドレールを設置した後に製品を取り付けてください。

【お手入れの注意】

- お手入れの際は、必ず本体ベルトからロックシステムを全て取り外し、各パーツごとに適切なお手入れを行ってください。
- 本体ベルト
 - 洗濯：可（水温95℃以下、液温が低い方が劣化が抑えられます）
 - 漂白剤：不可
 - アイロン：不可
 - ドライクリーニング：不可
 - 乾燥機：可（低温で弱回転の方が劣化が抑えられます）
- 洗濯の際には、必ずロックシステムを全て取り外していることを確認してください。
- 本体ベルトは洗濯により、約8%収縮する可能性があります。
- 洗剤は強力タイプは使用しないでください。弱性・中性タイプを使用してください。
- 柔軟剤は使用しないでください。
- 洗濯による劣化を抑えるため、ネット使用をおすすめします。
- 手用、足用の面ファスナー部は、劣化を抑えるため、留めた状態での洗濯をおすすめします。
- お手入れの後は、製品の破損・劣化・ホツレ等がないか、必ず確認してください。
- 綿パッド付腹部用ベルト・ムートンまもりカバー
 - 洗濯：水温は30～40℃を上限とし、洗濯機はマニュアルモードで洗いとすすぎで手洗いコースを設定し、脱水はしないでください。ムートン用洗剤を使用してください。
 - 乾燥方法：直射日光が当たらない日陰で干してください。ドラム式乾燥機を使用する場合は低温で弱回転コースを設定してください。
- ムートンの毛の倒れを防ぐため、洗濯したムートンが完全に乾く前に、専用ブラシなどで倒れた毛を起こすようにしてください。その後充分に乾燥させてください。
- 水の中につけおきをしないでください。
- ロックシステム
 - ロックシステムの各部品は洗濯できません。水濡れに注意して汚れを拭き取ってください。
- 継続的な製品の使用
 - 本体ベルト・ロックシステムは、製品の特性上、継続的な使用による製品への負荷や繰り返しの洗濯等により、破損、擦り切れ、ホツレ等の劣化を招く可能性があります。
 - 製品を安全にご使用頂くために、製品の状態に応じて、定期的な買い替えをおすすめします。

〈輸入販売元〉



松吉医科器械株式会社

<https://www.matsuyoshi.co.jp>

【本社】

〒113-8520 東京都文京区湯島3-14-9 湯島ビル3F

【営業所】

札幌・仙台・埼玉・東京・横浜・立川・名古屋
京都・大阪・広島・福岡

<https://www.matsuyoshi.co.jp>

