

シングルユース汚物処理システム  
クアトロ  
マセレーター Quattro



**HAIGH**

感染対策

看護師の  
間接業務  
軽減

経済効果  
の検証

汚物容器のワンウェイ廃棄による、  
交差感染の防止。  
直接看護時間の創出。  
光熱費等のトータルコストメリット。



### 大容量&コンパクト設計

人間工学に基づいた低位置投入口  
(高さ:784mm)

### 静音設計&「ナイトモード」

スタンダード運転時は約60db、ナイトモード  
運転時は、わずか約54dbを実現

### 表面抗菌コーティング

清掃しやすい凹凸の少ないデザイン

### 超微細マセレーションシステム

5mm以下の超微細に粉砕された専用パルプ  
容器はスムーズに下水へ排水されます

### ご使用方法



フタの開閉はハンズフリーです。  
フットペダルを踏み、フタを開けます。  
汚物ごと容器を投入します。



※手で開めないでください。  
(故障の原因になります)



フットペダルを踏み、フタを閉めます。  
同時に運転が開始されます。



### マセレーターQUATTRO (クアトロ)

コード	①24-8065-00□□
定価 (税抜)	¥1,250,000
製品サイズ	W411×D524×H908mm
重量	約58.5kg
1回処理数	汚物処理容器最大4コ
通常時在庫情報	都度問合せ

※ご注文の際には、□□にサブコードをご指定ください。

#### 【サブコード/定格周波数】

01	50Hz	02	60Hz
----	------	----	------

- 市場で最も微細に粉碎可能なマセレーターです。専用パルプ容器を5mm以下に粉碎し、スムーズな排水を実現します。
- 静音設計&クアトロ独自の『ナイトモード(約54db)』を搭載しています。



### HAIGH セーフガード24 (マセレーター用洗剤)

コード	②24-8668-00
定価 (税抜)	¥23,000
品番	HAI-02-05-5-2
容量	5L
通常時在庫情報	通常在庫

【成分】

### マツヨシ シングルユース再生パルプ汚物処理容器

日本製

コード	③24-8661-00	④24-8661-01	⑤24-8661-02	⑥24-8661-03	⑦24-8661-04
定価 (税抜)	¥3,600	¥7,500	¥3,600	¥3,700	¥2,700
品名	シングルユース尿器	シングルユース便器	シングルユースボール	シングルユース差込便器	シングルユース尿取りハット
品番	MY-JSU01	MY-JSU02	MY-JSU03	MY-JSU04	MY-JSU05
製品サイズ	約W115×D232×H115mm	約W295×D358×H86mm	約W240×D222×H84mm	約W304×D346×H75mm	約W326×D206×H99mm
容量	(満水時) 900ml	(満水時) 2000ml	(満水時) 1000ml	(満水時) 1300ml	(満水時) 1000ml (目盛りは700mlまで)
重量	約50g	約47g	約26g	約45g	約35g
入数	30コ	50コ	80コ	40コ	30コ
材質	再生パルプ				
通常時在庫情報	通常在庫				

コード	⑧24-8661-05	⑨24-8661-06	⑩24-8661-07	⑪24-8661-08
定価 (税抜)	¥5,200	¥4,250	¥3,500	¥1,500
品名	シングルユース膿盆	シングルユース深型便器	シングルユース深型ボール	シングルユース深型ボール用フタ
品番	MY-JSU06	MY-JSU07	MY-JSU08	MY-JSU09
製品サイズ	約W258×D151×H48mm	約W295×D358×H136mm	約W295×D221×H106mm	238×170mm
容量	(満水時) 700ml	(満水時) 3500ml	(満水時) 2500ml (目盛りは2000mlまで)	-
重量	約20g	約60g	約40g	約2g
入数	180コ	25コ	50コ	50コ
材質	再生パルプ			
通常時在庫情報	通常在庫			



※紙パルプ製容器はリサイクルされた古紙を有効活用しています。※古紙を再利用しているため、色・質・においなどが製造ロットにより異なる場合がございます。

### 組み合わせて使うとさらに便利に！


	 使用例	 使用例	 使用例	 使用例	 使用例
	シングルユース尿器専用の尿器掛けです。	シングルユース便器・差込便器を収納できます。据置・壁掛兼用。	シングルユースボールを収納できます。据置・壁掛兼用。	シングルユース便器を上に乗せて使用するサポーターです。	シングルユース差込便器を上に乗せて使用するサポーターです。
コード	⑫24-8662-00	⑬24-8663-00	⑭24-8664-00	⑮24-8665-00	⑯24-8666-00
定価 (税抜)	¥4,400	¥19,500	¥28,000	¥8,700	¥8,700
品名	HAIGH シングルユース尿器用ホルダー	HAIGH シングルユース便器用ラック	HAIGH シングルユースボール用ラック	HAIGH シングルユース便器用サポーター	HAIGH シングルユース差込便器用サポーター
品番	400-063002	400-063003	400-063004	400-063005	400-063006
製品サイズ	W132×D105×H175mm	W340×D400×H790mm	W310×D280×H790mm	W280×D370×H80mm	W290×D460×H80mm
重量	50g	1.05kg	0.95kg	395g	350g
付属品		壁取り付け用ビスセット			-
通常時在庫情報					通常在庫

# マセレーター クアトロ Quattro

## 製品仕様

外形寸法	W411×D524×H908mm
装置重量	約58.5kg
電 源	100V 50/60Hz 15A
処理数（ナイトモード）	4個（1個）
運転時間（ナイトモード）	116秒（265秒）
1 運転当たりの水使用量（ナイトモード）	21ℓ（23.5ℓ）
1 運転当たりの電気消費量	0.01Kw（10w）
騒音値（ナイトモード）	約60db（約54db）
蓋の開閉	フットペダル ⇒ 開閉ハンズフリー

## 寸法図

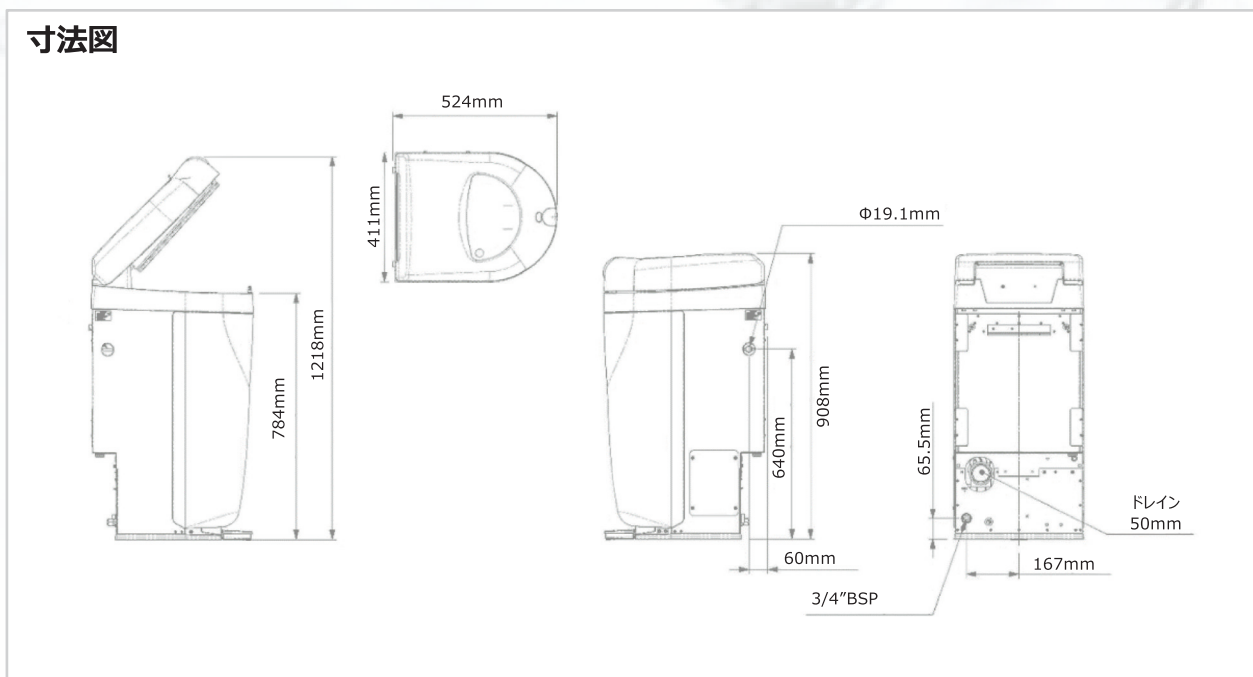

 松吉医科器械株式会社

製造元：  
英国 The Haigh Engineering  
Company Limited

【本社】  
〒113-8520 東京都文京区湯島3-14-9 湯島ビル3F

【オフィス】  
札幌・仙台・埼玉・東京・立川・横浜・名古屋・大阪  
広島・福岡

<https://www.matsuyoshi.co.jp>

